

FAUSTINA®

MANUAL DE USUARIO | DISPOSITIVO 3IN1 IPL PARA USO DOMÉSTICO

Modelos: HR_AC_SR | HR_2SR | HR_AC_2SR | 3SR



Depilación | Eliminación del acné | Rejuvenecimiento de piel*

*Tenga en cuenta que las lámparas pueden variar según el modelo adquirido.


LABOTEST



Bienvenido a tu nueva FAUSTINA[®] IPL

Tenga en cuenta que **1 lámpara**
ya viene conectada al dispositivo principal.

Puede comprobar la función de cada lámpara
en su parte posterior.

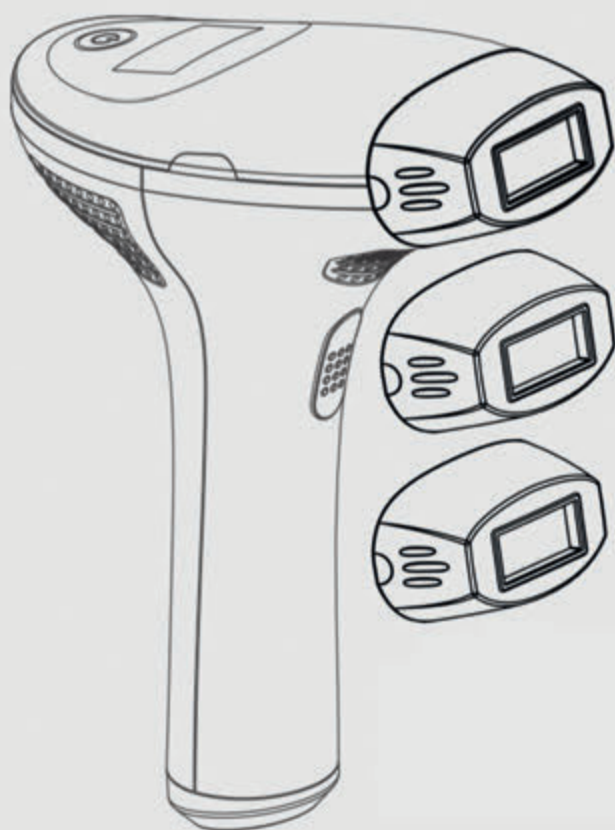

1x Depilación


**1x Eliminación del
acné**

**1x Rejuvenecimiento
de piel**

Las lámparas adicionales se pueden
comprar individualmente e instalar
en el dispositivo si se ha quedado sin
flashes o no adquirió todas las
funciones con su modelo.

LaboTest Ltd. vende 4 modelos FAUSTINA® IPL diferentes.

Comprueba cuál es el tuyo:

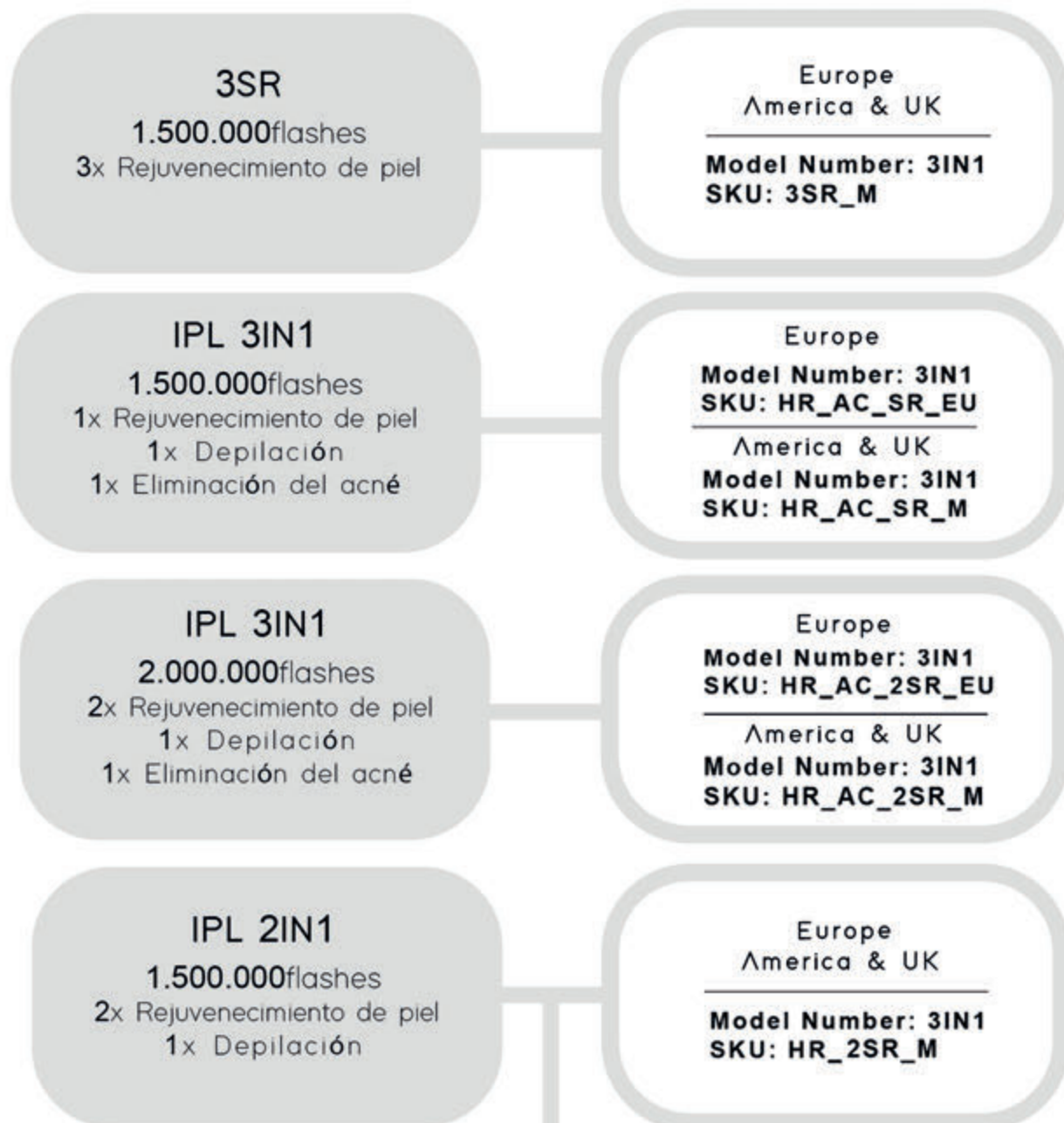

Índice

Prefacio	1 - 2
Aviso de producto	3 - 4
Información del Producto	4 - 6
Advertencias	7 - 8
Precauciones	9 - 10
Cómo usar FAUSTINA IPL	11 - 13
Modo automático y manual	14
Prueba de sensibilidad cutánea	15
Configuración de energía	15
Modo de uso	16 - 22
FAQs antes de usar el dispositivo	23 - 32
FAQs después de usar el dispositivo	33 - 37
Garantía	39 - 40
Servicio de información	41 - 42

Introducción

Gracias por elegir el dispositivo de belleza IPL FAUSTINA (multifuncional) de LaboTest. Este dispositivo utiliza tecnología E-IPL (filtra las luces dañinas y no válidas para mantener tomas efectivas para todas las funciones), y puede lograr la depilación, el rejuvenecimiento de la piel y la eliminación del acné cambiando a la lámpara de función adecuada. Este producto se fabricó teniendo en cuenta las especificaciones de eficiencia, moda, salud y alta tecnología. Prepárese ya que FAUSTINA IPL marca el comienzo de su propia clínica de belleza privada.

Por favor, lea este manual de usuario con mucha atención antes de usar el dispositivo y guárdelo en un lugar seguro por si necesita consultarlo en el futuro.

Si tiene algún problema con su dispositivo, no dude en contactarnos en nuestro sitio web en www.labotest.co.uk

Aviso de producto

Este manual de usuario le guiará a través del uso de su dispositivo FAUSTINA IPL.

- El fabricante de este producto sigue estrategias de desarrollo sostenibles. Esto significa que conservan el derecho a no notificar a los clientes cuando cambian la función, la interfaz y la apariencia del producto.
- Si hay una diferencia entre la descripción y el producto real debido a una actualización, consulte el producto real.
- Utilice el dispositivo de acuerdo con los pasos operativos y la configuración del tratamiento correctos.

Informacion del producto

Funcion de cada lampara

Unidade principal x1; lâmpadas x3; Óculos UV x1;


Adaptador x1; Manual do usuário x1




Unidade principal x1;
Lamparas x3



Gafas UV x1

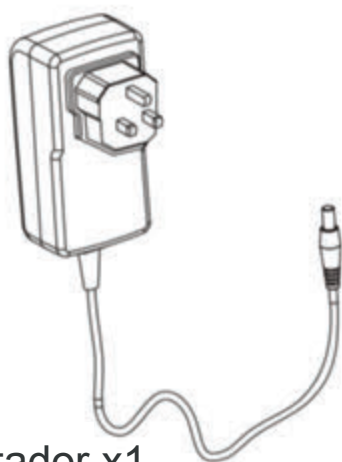

Adaptador x1

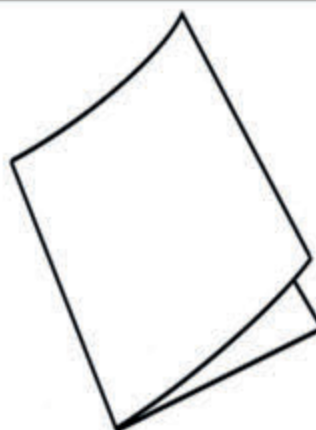

Manual x1


Función

Función 1 - **Depilación**


Función 2 - **Rejuvenecimiento de piel**

Función 3 - **Eliminación del acné**


Figura 1: lamparas

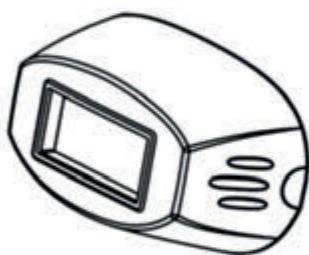

HR (Depilación)

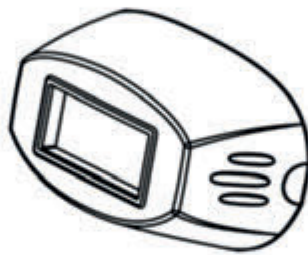

SR(Rejuvenescimiento de piel)

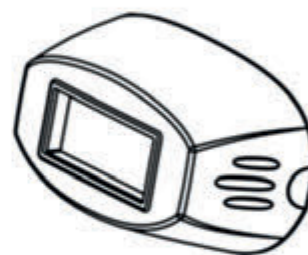

AC(Eliminación del acné)

Parámetros

Potencia de entrada: 36W

Voltaje: 100V - 240V

Rango de frecuencia nominal: 50Hz / 60Hz

Temperatura de almacenamiento: 0°C - 45°C

Temperatura de trabajo: 5°C - 36°C

Humedad de trabajo: 25% - 75%

Estructura del producto: (Figura 2)



Advertencias

Por favor lea estos cuidadosamente

NO USE si es menor de 18 años.

Se desconocen los efectos del uso del sistema en este grupo de edad.



NO USE si la piel del área que desea tratar está bronceada o quemada. El uso del dispositivo sobre piel bronceada o quemada puede provocar un blanqueamiento u oscurecimiento temporal (o incluso permanente) de la piel.



NO LO USE si está embarazada, concibe o amamantando. Los cambios hormonales ocurren durante el embarazo y la lactancia y podrían aumentar el riesgo de lesión o sensibilidad cutánea.



NO LO USE si tiene epilepsia, convulsiones inducidas por la luz o migrañas. Los destellos de energía pueden causar fuertes dolores de cabeza y migrañas.



NO USAR en tatuajes, manchas marrones oscuras o negras (como pecas oscuras, marcas de nacimiento, lunares o verrugas). Los tatuajes o las manchas oscuras pueden absorber demasiada energía luminosa, lo que podría hacer que su piel se hinche, deje ampollas temporales o permanentes o decolore su piel. También puede provocar quemaduras.



NO UTILICE la lámpara de depilación en barbas masculinas, ya que puede producir resultados desiguales. El uso de la lámpara SR en áreas visibles de cabello puede provocar la eliminación de estos folículos pilosos. Para prevenirlo, no apliques flash directamente a la zona donde crece el cabello.



NO USE la lámpara de depilación en la cabeza, las orejas, el cuello, los pezones, los genitales o alrededor del ano. **NO USE** la lámpara SR en su cabeza, pezones, genitales o cejas. El uso en estas áreas podría causar hinchazón, ampollas o decoloración temporal de la piel. No recomendamos el uso de la lámpara SR en la zona del cuello, ya que es muy sensible.

NO LO USE si tiene alguna afección cutánea activa en el área que va a tratar. Esto incluye acné (cuando se usa la lámpara HR o SR), llagas, psoriasis, eccema, quemaduras, herpes, heridas o erupciones. Estas afecciones pueden hacer que su piel sea más sensible al tratamiento con luz y pueden hacer que los tratamientos sean incómodos o causar inflamación, ampollas o infecciones en la piel. Si siente que alguna afección cutánea preexistente se ha curado lo suficiente como para usar el dispositivo, consulte primero a su médico o dermatólogo.

NO USE el dispositivo si tiene antecedentes de formación de cicatrices queloides, una sensibilidad conocida a la luz (fotosensibilidad) o está tomando medicamentos que hacen que su piel sea más sensible a la luz, incluidos los reactivos antiinflamatorios no esteroideos, p. Ej. Aspirinas, Ibuprofenos, Cetaminofenos, Tetraciclinas, Fenotiazinas, Tiazidas, Diuréticos, Sulfonilureas, Hidroxiácidos (AHAS), Beta-Hidroxiácidos (BHAS), Retin-A, Accutane y / o retinoides tópicos.

NO USE si tiene una enfermedad relacionada con la fotosensibilidad, como porfiria, erupción polimórfica de luz, urticaria solar, lupus, etc. Estas condiciones hacen que su piel sea más sensible al tratamiento con luz y podrían hacer que el tratamiento sea incómodo o causar hinchazón de la piel, ampollas, o infecciones.

NO consuma los siguientes medicamentos si va a continuar con los tratamientos de IPL: Accutane, Roaccutane, Retin A, Vitamin B o AHA en los últimos 6 meses.

Precauciones

Por favor lea estos cuidadosamente

No puede encender el dispositivo si no hay ninguna lámpara conectada. Desconecte el dispositivo del adaptador primero para reemplazar la lámpara. Durante esta operación, no cubra los orificios de ventilación para evitar el sobrecalentamiento.



Cuando use la lámpara de depilación, asegúrese siempre de afeitar el área que va a tratar.

Le recomendamos que use las gafas de protección UV que se incluyen en su paquete mientras se somete al tratamiento. No mire directamente a la luz o destellos durante largos períodos de tiempo.



Las lámparas desechadas no se pueden reciclar. Trate las lámparas desechadas de acuerdo con las leyes y ordenanzas locales.



Antes de someterse al tratamiento, limpie su piel y asegúrese de que esté seca. No aplique cosméticos, ya que ciertos productos químicos pueden hacer que el dispositivo no funcione correctamente o que no funcione según lo previsto.



Ajuste el nivel de energía de bajo a alto. En condición de seguridad, cuanto mayor sea el nivel de energía, mejores serán sus resultados. Después de su tratamiento, es normal que experimente enrojecimiento. En esos casos, se recomienda que aplique hielo en las áreas afectadas.



Utilice una crema hidratante para la piel y un producto de protección solar después de los tratamientos de fototerapia.

Una vez finalizado el tratamiento y apagado el dispositivo, utilice un bastoncillo o un paño de algodón húmedo para limpiar la ventana de tratamiento. Esto puede evitar que el cabello se endurezca sobre la superficie de la lámpara, afectando posteriormente la energía de cada disparo.

Utilice solo un paño suave y seco o un paño de microfibra para limpiar el exterior del dispositivo. También puede usar una toallita sin alcohol o un paño húmedo.



Asegúrese de que el sistema, los accesorios y las lámparas de su unidad no entren en contacto con agua o humedad.

Guarde el dispositivo y sus accesorios en un ambiente seco y ventilado, y manténgalos alejados de los niños.

No introduzca instrumentos metálicos ni ningún otro tipo de objeto en los orificios de emisión de calor. Esto representa un riesgo de descarga eléctrica.



En caso de que su dispositivo se sumerja o se moje en agua, envíelo de regreso al fabricante para que lo examine y determine si es reparable. En caso de que el sistema esté encendido cuando esté mojado, **DESENCHUFE** inmediatamente el sistema antes de tocar el dispositivo para su salud y seguridad.

NO intente desmontar y reparar a su propia discreción.

Si su dispositivo no funciona normalmente, devuelva la unidad y los accesorios al fabricante, donde el personal de mantenimiento calificado los examinará por usted.



Cómo usar FAUSTINA IPL

es tan simple, te encantará.

- 1** Limpie la ventana de salida de luz del cartucho con un paño húmedo o un bastoncillo de algodón.
Esto se hace para eliminar el pelo y el polvo de la ventana de tratamiento.



- 2** Sujete la lámpara por ambos lados, como se muestra a continuación, luego insértela o extraígalas con un movimiento recto.



- 3** Conecte el cable de alimentación al dispositivo



- 4** Coloque su sistema sobre una mesa o área cerca de una toma de corriente. Aleje los líquidos del área.


- 5** Asegúrese de que la lámpara esté instalada correctamente antes de encenderla.



-
- 6** Después de conectar el cable de alimentación a una toma de corriente, el indicador de estado comenzará a parpadear lentamente.



-
- 7** Presione el botón de encendido durante más de 2 segundos para encender el dispositivo. Después de encenderlo, escuchará los ventiladores y verá que se enciende la pantalla LCD. El tipo de lámpara, las tomas restantes, el nivel de energía, el ícono del termómetro y el ícono del ventilador se mostrarán e indicarán en la pantalla LCD. Los indicadores de estado seguirán parpadeando, lo que significa que el dispositivo se está preparando para su uso. Una vez que esté listo, el indicador se apagará. Cuando la ventana de tratamiento entra en contacto con la piel, el indicador se volverá azul, lo que significa que el dispositivo está listo para emitir destellos.

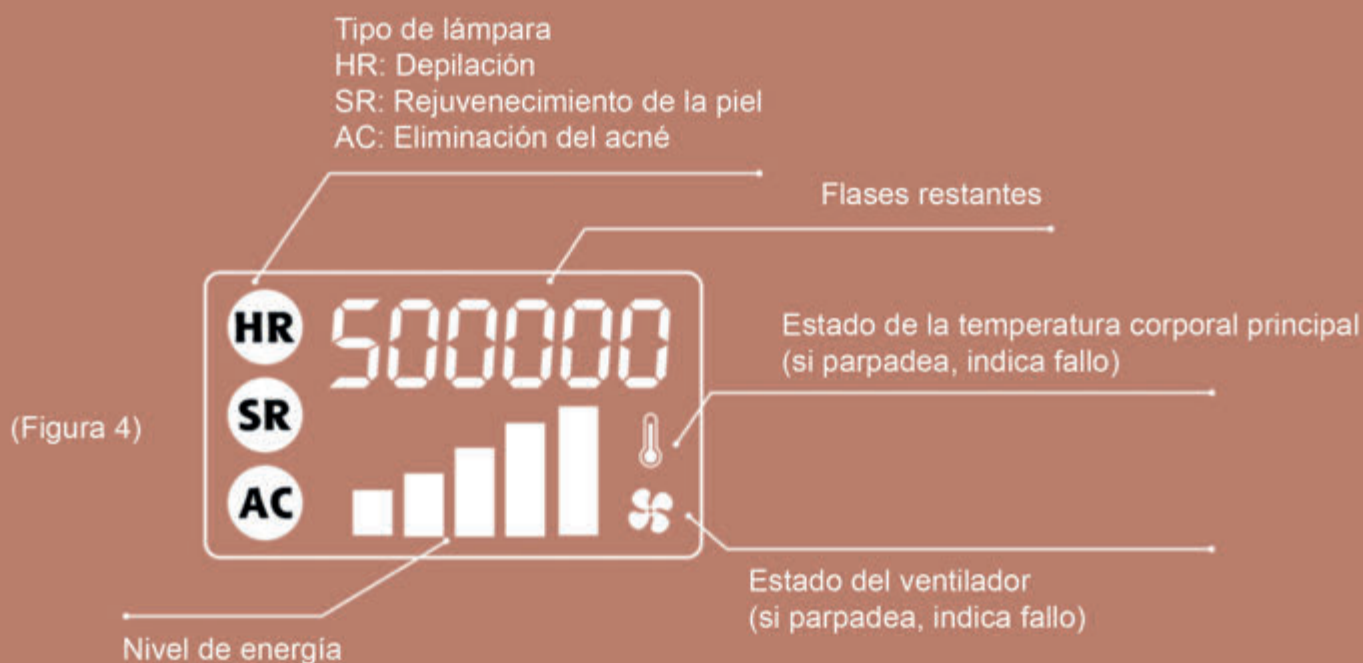

- Presione el botón de encendido para ajustar el nivel de energía de bajo a alto: el nivel 1 es el más bajo y el nivel 5 es el más alto
- Asegúrese de que la ventana de tratamiento esté colocada firmemente contra su piel. El indicador de estado se iluminará cuando la ventana de tratamiento esté orientada hacia un área adecuada.



Nota: el dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos sin actividad.


Modo automático y manual

El dispositivo FAUSTINA IPL tiene dos modos: automático y manual.

Manual es el modo predeterminado.

Para activar el modo automático:

- Presione el botón de disparo durante unos segundos.

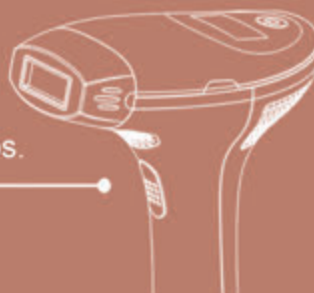

- Cuando este modo está activado, el icono de la función en la interfaz de usuario comenzará a parpadear.

Dependiendo del modo (HR / SR / AC)



- Ahora puede comenzar a deslizar la ventana de la lámpara en el área que desea tratar y el dispositivo parpadeará automáticamente.

Este modo es particularmente útil para el abdomen, las piernas y los muslos.



- Si desea volver al modo manual, presione el botón de disparo para salir del modo automático.

Presione el botón de disparo durante unos segundos.



Prueba de sensibilidad cutánea

En caso de que esté utilizando IPL por primera vez

Si está utilizando este sistema por primera vez o en un área nueva de su cuerpo, elija un área pequeña cerca del área que desea tratar, con el fin de realizar una prueba de sensibilidad cutánea. Utilice el nivel más bajo (1). Siga las instrucciones de tratamiento a continuación, pero asegúrese de emitir solo 2-3 disparos. Después de la prueba cutánea, espere unos 60 minutos y revise su piel para detectar cualquier reacción. Si después de 60 minutos la piel parece normal y no hay enrojecimiento u otra reacción cutánea, entonces está listo para realizar un tratamiento completo.

Configuraciones


Calibración más sencilla con una pantalla LCD

Elija el nivel de energía adecuado de acuerdo con la tolerancia de su piel y aumente gradualmente el nivel de energía de uno a cinco. Si no hay ningún dolor o reacción intolerable de ningún tipo, puede sentirse libre de aumentar gradualmente la energía. No use el dispositivo en la misma parte exacta de su piel disparando varias veces. Hacerlo puede causar demasiado calor y puede resultar en hinchazón de la piel, ampollas o cambios temporales / permanentes en el color de su piel. Después de cada flash, mueva lentamente la ventana de tratamiento a una mancha de piel vecina. Antes de volver a una mancha cutánea previamente tratada, espere al menos 20 segundos.

Modo de uso

El propósito de cada lámpara

FAUSTINA IPL - Lámpara de depilación
(Instale la lámpara HR)

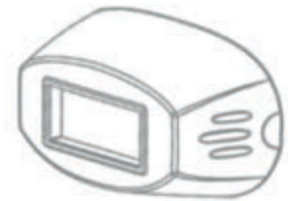

1. Propósito de la lámpara

Para la eliminación del vello de los labios, las axilas, el vello corporal y de las piernas, el vello en algunos lugares afecta su apariencia (como en la frente y el área del bikini, por ejemplo).

**El efecto es diferente según el color de la piel.
Este dispositivo no es adecuado para cabello
pelirrojo, gris / blanco y rubio blanquecino.**


Guías de piel y cabello

Piele								
Cabello								

2 . Modo de uso

- 1 Afeita y limpia la zona que vas a tratar.**
- 2 Use gafas de protección UV para evitar deslumbramiento.**
- 3 Busque una toma de corriente y aleje los líquidos del área. Inserte el adaptador en la toma de corriente y el cable de alimentación en el dispositivo.**
- 4 Elija un nivel de energía adecuado (Consulte las páginas 13-14 - Comience desde un nivel bajo)**
- 5 Inicie el tratamiento en el área que desea tratar. Repita este paso 2-3 veces. No dispare exactamente en el mismo lugar repetidamente.**

Consejo: Para tratar áreas más grandes, puede usar el modo automático. Para activar este modo, consulte la página 14. Esto es particularmente útil para diafragmas, piernas y muslos.

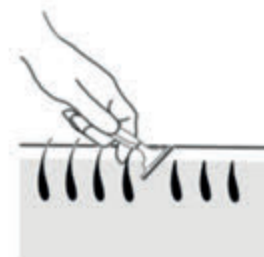

6 Aplicar crema anti-cabello después del tratamiento (opcional).

7 Apague el dispositivo y use un paño húmedo o un bastoncillo de algodón para limpiar la ventana de tratamiento.

8 Vuelva a colocar el dispositivo y sus accesorios en su caja y guárdelo en un lugar fresco, seco y seguro. Mantener alejado de niños y líquidos.



3. Recomendaciones de tratamiento

7-9 tratamientos

En los primeros 3 tratamientos, haga un tratamiento cada semana.

En los siguientes 4-9 tratamientos, realice un tratamiento cada 2-3 semanas.

Durante el período de mantenimiento, realice un tratamiento cada 2 meses en las áreas con crecimiento de cabello visible.

FAUSTINA IPL - Lámpara de rejuvenecimiento de la piel

(Instale la lámpara SR)




1. Propósito de la lámpara

Para piel áspera y envejecida, piel oscura, poros dilatados, arrugas, falta de elasticidad, luminosidad y capilares faciales rotos.

2. Modo de uso

1 Limpia la zona que vas a tratar y el filtro de la lámpara con un bastoncillo de algodón.

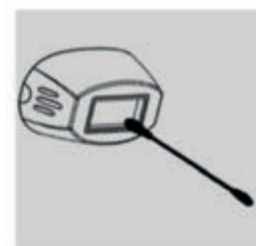

2 Use gafas de protección UV para evitar deslumbramiento.



3 Elija un nivel de energía adecuado (Consulte las páginas 13-14 - Comience desde un nivel bajo).



4 Coloque la ventana de tratamiento firmemente contra su piel y trate las diferentes áreas a medida que avanza. No dispare exactamente en el mismo lugar repetidamente.

5 Inicie el tratamiento.
Repita el paso 4, 2 a 3 veces.

6 Aplicar crema hidratante después del tratamiento (opcional / recomendado).



7 Apague el dispositivo y utilice un paño húmedo o un bastoncillo de algodón para limpiar la ventana de tratamiento.



8 Vuelva a colocar el dispositivo y sus accesorios en su caja y guárdelo en un lugar fresco, seco y seguro.

3. Recomendaciones de tratamiento

8 tratamientos - Un tratamiento por semana

FAUSTINA IPL - Lámpara de eliminación de acné

(Instale la lámpara AC)



1. Propósito de la lámpara

Para pieles grasas con pápula, impétigo y acné inflamatorio quístico.

2. Modo de uso

- 1** Limpia la zona que vas a tratar y el filtro de la lámpara con un bastoncillo de algodón.



- 2** Si hay algun acné inflamado antes del tratamiento, limpie las áreas afectadas con productos apropiados.

- 3** Use gafas de protección UV para evitar deslumbramiento.



- 4** Elija un nivel de energía adecuado (Consulte las páginas 13-14 Comience desde un nivel bajo)



- 5** Coloque la ventana de tratamiento firmemente contra su piel y trate las diferentes áreas a medida que avanza. No dispare exactamente en el mismo lugar repetidamente. Asegúrese de que cada intervalo de disparo sea de al menos 20 segundos.

6 Aplicar crema hidratante después del tratamiento (opcional / recomendado).

7 Apague el dispositivo y utilice un paño húmedo o un bastoncillo de algodón para limpiar la ventana de tratamiento.



8 Vuelva a colocar el dispositivo y sus accesorios en su caja y guárdelo en un lugar fresco, seco y seguro.
Mantener alejado de niños y líquidos.



3. Recomendaciones de tratamiento

10 tratamientos - Un tratamientos cada 3 días.

FAQs

Preguntas frecuentes antes de utilizar FAUSTINA IPL

Nunca he usado tratamientos de depilación IPL. ¿Es realmente seguro?

Puntos clave para la seguridad de nuestras IPL:

1- Afeitarse de antemano evitará que su piel se queme o se irrite en el proceso. La luz de su dispositivo podrá apuntar a la melanina de su cabello de esta manera mucho más fácilmente, ya que actúa de manera similar a un conductor.

2- Para el tratamiento facial, deberá asegurarse de que su rostro esté limpio y libre de agua, cremas y aceites antes de usar IPL.

3- Úselo en el tipo correcto de piel / cabello, elija un nivel de energía adecuado de acuerdo con la tolerancia de su piel y aumente gradualmente el nivel de energía de uno a cinco. Si no hay ningún dolor o reacción intolerable de ningún tipo, puede sentirse libre de aumentar gradualmente la energía.

4- No use el dispositivo en la misma parte exacta de su piel disparando varias veces. Hacerlo puede causar demasiado calor y puede resultar en hinchazón de la piel.

5- Las máquinas IPL de uso doméstico se utilizan en piel normal sana. No use la depilación IPL en los lunares. no use la depilación IPL si tiene diabetes o si está recibiendo quimioterapia o si consume medicamentos fotosensibles o si es epiléptico. Es importante informar a su médico de cabecera o un especialista de antemano si está tomando ciertos medicamentos antes de usar IPL.

Entonces, IPL es bastante seguro, ¿verdad?

Sí, nuestro sistema doméstico IPL es perfectamente seguro siempre que lo use de la manera prescrita y en el tipo correcto de piel y cabello.



¿Quién puede usar IPL? ¿Es solo para mujeres?

Es para cualquier persona que tenga vello no deseado. Para mujeres y hombres que quieren lucir más jóvenes con una piel más saludable. Para quien quiera eliminar rubor, manchas de la edad, rojeces crónicas o arrugas. ¡IPL puede funcionar para usted!



¿Son permanentes los resultados de la depilación FAUSTINA 3IN1 IPL? ¿Significa esto que mi cabello nunca volverá a crecer?

Cuando los pelos vuelvan a crecer, serán más claros, más finos y menos numerosos. Después de cuatro a seis tratamientos, puede esperar una marcada reducción del cabello. Cualquier rebrote se puede controlar con tratamientos de retoque cada seis a 12 meses.

¿Puedo usar IPL durante el embarazo?

El tratamiento no se puede realizar durante el embarazo y la lactancia. Esto se debe a los cambios hormonales y de pigmentación provocados por su embarazo. Se recomienda someterse a tratamiento después de la lactancia y después de completar 2 ciclos de menstruación.



¿Puedo usar el dispositivo IPL durante la menstruación?

Durante la menstruación, no se puede realizar el tratamiento del área púbica.

¿Puedo usar IPL si tengo una determinada condición?

No puede usar IPL si ha consumido, aplicado o ha tenido lo siguiente:

- Accutane, Roaccutane, Retin A, Vitamina B o AHA en los últimos 6 meses;
- Tiene la piel quemada por el sol, quemada por el viento, seca, agrietada, irritada o rota o alguna herida abierta en el área de tratamiento;
- Tiene llagas, verrugas, úlceras, lunares, marcas de nacimiento o cualquier tatuaje en el área de tratamiento.

Recibió tratamiento con radiación (p. Ej., Bronceado con rayos ultravioleta), electrólisis o exposición excesiva al sol en los últimos 6 meses

- Tomó el sol en exceso durante la última semana;
- Se sometió a un procedimiento quirúrgico en los últimos meses;
- Está embarazada o amamantando.

Nota: Evite nadar en agua con cloro fuerte inmediatamente antes de una sesión de tratamiento con IPL.

Evite la exfoliación, la microdermoabrasión o los peelings durante 1 semana antes de las sesiones de tratamiento..

¿En qué casos se me aconseja no someterme a tratamientos de IPL?

Si tiene diabetes - las personas con diabetes deben comprender que su afección compromete su sistema inmunológico. Por tanto, el proceso de curación de los posibles efectos adversos tardará más de lo habitual. Los riesgos de infección también son motivo de gran preocupación.

Si se está sometiendo a quimioterapia - los pacientes que actualmente se someten a quimioterapia también poseen un sistema inmunológico comprometido que los hace no ideales para los tratamientos con IPL.

Si ha consumido medicamentos fotosensibles -

hay un puñado de medicamentos fotosensibles que pueden intensificar potencialmente la sensibilidad o la respuesta a los tratamientos de IPL.

Si es epiléptico - la luz del tratamiento puede provocar un ataque.

Es importante informar a su médico de cabecera o un especialista de antemano si está tomando ciertos medicamentos antes de usar IPL.



¿Cuál es la edad mínima recomendada?

No hay una edad mínima o máxima para el tratamiento con IPL. Sin embargo, los niños menores de 18 años no deben usar dispositivos IPL ni someterse a tratamientos. Esto se debe a que el equilibrio hormonal en el cuerpo es inestable y el crecimiento de cabello nuevo es rápido.

+18

¿Puedo utilizar el dispositivo IPL para la depilación del área del bikini?

Es seguro usar IPL alrededor del área del bikini para deshacerse del vello no deseado. Ya sea que prefieras un estilo brasileño (solo una tira de cabello) o un estilo hollywoodense completo; tal vez solo arregle los bordes. Con IPL, puede disfrutar permanentemente de una piel suave y olvidarse de los costosos tratamientos de salón.



¿La luz intermitente dañará mis ojos?

El sistema de seguridad de nuestros productos se ha desarrollado en el dispositivo, lo que hace que la luz intermitente sea inofensiva para los ojos. Use el dispositivo en una habitación bien iluminada para que la luz sea menos deslumbrante para sus ojos. No es necesario llevar gafas durante el uso. Nunca use IPL en el área alrededor de sus ojos o para tratar sus cejas. Esto es lo único que debes recordar.



¿Cómo preparar la piel antes del tratamiento con IPL?

Debe pretratar su piel quitando el vello de la superficie de la piel el mismo día del tratamiento o el día anterior.

Para obtener los mejores resultados, le recomendamos que no realice ningún tipo de depilación que quite la raíz del vello, como depilación con cera o con pinzas de pello, blanqueamiento ni tratamientos de electrólisis. El afeitado es su nuevo método de depilación favorito antes y entre los tratamientos; cualquier otra cosa que extraiga el pelo del folículo y dificultará el proceso de IPL, que no desea. Si el cabello vuelve a crecer entre tratamientos, simplemente acorte el intervalo de tratamiento, pero no trate más de una vez cada 2 semanas, ya que esto solo aumentará el riesgo de irritación de la piel.

¿Cuál es la diferencia entre el modo Automatico y el modo Manual?

El dispositivo tiene dos modos de aplicación: modo Automatico y modo Manual. El modo de Manual es para áreas pequeñas y huesudas que son más difíciles de tratar (por ejemplo, rodillas, axilas). Coloque el aparato sobre la piel, solo presione y flash, luego mueva el dispositivo a la siguiente área cercana que debe tratarse.

El modo de Automatico es para tratar áreas más grandes (por ejemplo, piernas). Coloque el aparato contra su piel, mientras mantiene presionado el botón de flash durante la aplicación; simplemente deslice el aparato y parpadeará a medida que avanza. Esto hace que el tratamiento de grandes áreas sea más fácil y rápido.




¿El IPL es adecuado para todo tipo de piel y cabello?

Por lo general, la IPL no es adecuada para tonos de piel más oscuros, porque hay mucha más melanina en la piel que la luz apuntará y calentará. Esto le causará dolor y puede dañar su piel. Este dispositivo tiene un probador de tono de piel y tacto incorporado y fuerza de flash ajustable y adaptable a su tipo de piel.

Cuanto más oscuro sea el color de tu cabello, mejor, porque el cabello oscuro tiene mucho pigmento. Es esto lo que la luz apunta y lo calienta para dañar el folículo y detener el crecimiento del cabello. Dado que los cabellos rubios, grises y blancos no contienen cantidad suficiente de melanina, los tratamientos IPL nunca funcionarán con estos colores de cabello. El cabello rojo contiene un tipo diferente de melanina que no responde a la IPL.

¿Debo eliminar el vello facial antes de usar IPL?

Al igual que con el cuerpo, al usar IPL es importante que la energía de la luz se canalice hacia los folículos pilosos de su cuerpo de la manera más eficiente. Esto se puede hacer afeitándose.

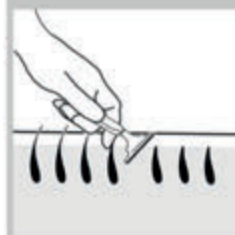

¿Se puede utilizar FAUSTINA 3IN1 si tengo placas de metal?

FAUSTINA 3IN1 IPL llega hasta la dermis profunda y la capa de grasa subcutánea superficial. No penetrará lo suficientemente profundo como para afectar o causar dolor o problemas con cualquier metal en su cuerpo (por ejemplo, los tornillos de metal suelen ser más profundos que eso, en las estructuras óseas debajo del músculo ...) Es seguro usar FAUSTINA 3IN1 en sus piernas, brazos, o incluso placas de metal en el pecho.

ie

¿FAUSTINA 3IN1 funcionará en cabellos claros y tonos de piel claros?

Sí, puede usarlo para tonos de piel claros, pero desafortunadamente, IPL no funciona para todos los colores de cabello y tonos de piel. Es importante tener en cuenta que si tienes el cabello rojo, gris / blanco o rubio blanco, la IPL no funcionará para ti.

La tecnología IPL para depilación actúa apuntando a la melanina dentro de la raíz del cabello, de la que carecen estos tres colores, lo que hace que la tecnología sea inútil.

¡Pero no desesperes!

Todavía puedes usar FAUSTINA 3IN1 para otros fines, como rejuvenecimiento de la piel, piel áspera, envejecida, piel oscura, poros dilatados, arrugas, falta de elasticidad, luminosidad, capilares rotos y reducción del acné. FAUSTINA 3IN1 ha demostrado ser muy eficaz en estos dominios.

lf

¿Qué resultados puedo esperar?

Si tus tratamientos son consistentes, lograrás una piel duradera, suave y sin vello. Solo tenga en cuenta que se necesitarán varios tratamientos para que pueda comenzar a ver resultados; lleva tiempo. Esto se debe a que nuestros folículos pilosos tienen sus propios ciclos de crecimiento individuales. Pero le prometemos que verá los notables resultados que le harán sonreír.



¿Es FAUSTINA 3IN1 seguro de usar para rejuvenecer la piel en pieles medio-oscuras?

La mejor manera es elegir un área pequeña cerca del área que desea tratar, con el fin de realizar una prueba de sensibilidad cutánea.

Utilice el nivel más bajo de FAUSTINA 3IN1 (1). Siga las instrucciones de tratamiento a continuación, pero asegúrese de emitir solo 2-3 disparos. Después de la prueba cutánea, espere unos 60 minutos y revise su piel para detectar cualquier reacción.

Si después de 60 minutos la piel parece normal y no hay enrojecimiento u otra reacción cutánea, entonces está listo para realizar un tratamiento completo y aumentar gradualmente el nivel de energía de (1) a (2).

Si no hay ningún dolor o reacción intolerable de ningún tipo, puede sentirse libre de aumentar gradualmente la energía.

¿Cuántos julios tiene FAUSTINA 3IN1 y puede deshacerse de los capilares rotos?

La potencia: 3,5 - 5,1 j / cm² o 19,89 julios para la ventana de la lámpara. esto sitúa a FAUSTINA 3IN1 en la cima de las IPL similares del mercado.

Sí, puede utilizar la lámpara SR adjunta con FAUSTINA 3IN1 para el propósito de tratar capilares rotos ...

¿Como funciona? La energía luminosa se aplica a la piel, donde los vasos sanguíneos la absorben fácilmente, calentándola hasta un punto en el que se destruyen.

Después del tratamiento, los vasos se aclaran rápidamente a medida que el cuerpo los reabsorbe, dejando poco o ningún rastro de la lesión original.

Algunos pequeños capilares y venas desaparecen de repente. Sin embargo, se necesitan de 1 a 7 tratamientos, uno por semana. Algunos capilares y venas son más visibles después del tratamiento, lo que es una señal de que están destruidos y desaparecerán en unas pocas semanas.

Hay 5 niveles de energía para adaptarse a una amplia gama de tratamientos diferentes (piel áspera y envejecida, piel atenuada, poros dilatados, arrugas, falta de elasticidad y luminosidad). Puede aumentar gradualmente el nivel de energía de uno a cinco si no hay ningún dolor o reacción intolerable de ningún tipo



Tengo un tono de piel medio a oscuro, ¿puedo usar FAUSTINA 3IN1 sin riesgo?

Desafortunadamente, es posible que no funcione para personas con piel de color marrón muy oscuro a negro. Pero, para las personas con piel clara a marrón oscura, es seguro y eficaz.



¿Se puede utilizar FAUSTINA 3IN1 también en el rostro?

FAUSTINA 3IN1 es seguro para usar en la cara. Funciona eficazmente en el labio superior.

No debe usarse cerca de los ojos. para los hombres, no recomendamos su uso en la barba. El uso en barbas masculinas puede dar lugar a resultados desiguales. Con FAUSTINA 3IN1 puede utilizar las lámparas de rejuvenecimiento de la piel y eliminación del acné para revertir el daño solar, tratar lesiones vasculares, reducir las arrugas, mejorar el contorno facial, cerrar los poros, aumentar la producción de colágeno y elastina, estirar la piel, reducir la aparición de manchas solares, pecas, reducir el gravedad del acné, piel inflamada y excreción de sebo.

¿Puede IPL estirar la piel de mi cuello?

Los resultados de IPL para estirar la piel del cuello suelen ser sutiles y requieren múltiples sesiones de tratamiento.



¿Cuál es la diferencia o la longitud de onda de la depilación frente al rejuvenecimiento de la piel y la eliminación del acné de la lámpara FAUSTINA 3IN1?

La longitud de onda de las lámparas FAUSTINA 3 en 1 es la siguiente:

Depilación: 530 ~ 1100 nm

Rejuvenecimiento de la piel: 560 ~ 1100 nm

Tratamiento del acné: 400 ~ 700 nm.

Potencia: 3,5 - 5,1 j / cm²

Además de las longitudes de onda, el flujo de energía j / cm², existen muchos factores para apuntar de forma más selectiva a elementos celulares o estructurales deseados, incluidas las secuencias de pulsos, la duración del pulso, el tiempo de retardo del pulso y la filtración que se utiliza para cada tratamiento.

Si usa el tratamiento ligero para la piel en la cara, cerca de la línea del cabello, ¿también eliminará el vello?

No recomendamos usar el modo de rejuvenecimiento de la piel en o cerca de la línea del cabello, esto hará que se elimine el vello en el área que disparó.

¿El modo SR elimina las manchas marrones?

El modo SR para FAUSTINA 3IN1 IPL ayuda a tratar las manchas marrones calentando selectivamente el pigmento. Luego, el área dañada calentada se levantará a la superficie de la piel donde se eliminará mediante el proceso de exfoliación natural de la piel. Las manchas marrones se oscurecerán inicialmente durante las próximas 24 horas, luego se desvanecerán lentamente durante las próximas semanas.



¿Durante cuánto tiempo debe dejar de usar tratamientos cutáneos tópicos (es decir, Retin A, vitamina B o AHA) antes de usar el láser para el rejuvenecimiento de la piel?

Nuestro FAUSTINA IPL es completamente seguro si se usa de acuerdo con nuestro manual. Sin embargo, no tome los siguientes medicamentos si va a continuar con un tratamiento con IPL, ya que pueden ocurrir efectos secundarios: Accutane, Roaccutane, Retin A, Vitamin B o AHA en los últimos 6 meses.

¿Debería usar un gel conductor?

No necesita gel conductor. Deberá asegurarse de que su piel esté limpia y libre de agua, cremas y aceites antes de usar FAUSTINA IPL. Después de todos y cada uno de los tratamientos, aplique una crema calmante para enfriar la piel y ayudar a evitar cualquier irritación cutánea.



FAQs

Preguntas frecuentes después de utilizar FAUSTINA IPL

¿Qué debo esperar después de mi tratamiento con IPL y qué es la atención posterior al tratamiento?

Su piel puede estar ligeramente rosada o enrojecida inmediatamente después de su tratamiento, y puede experimentar una leve hinchazón que debería desaparecer en unos pocos días.

Durante las próximas 24 horas, recomendamos:

- Sin baños calientes
- No nadar ni tomar el sol
- Sin ropa ajustada
- No aplicación de productos perfumados como desodorante, antitranspirante, autobronceador o maquillaje en la zona tratada
- No restregar ni frotar el área tratada (esto puede causar una infección bacteriana)

Evite los deportes bruscos durante 24 a 48 horas.
Hidrata tu cuerpo bebiendo mucha agua.

¿Qué pasa con las reacciones de la piel?

Estos suelen ser temporales y desaparecerán dentro de las 24 horas posteriores al tratamiento. Puede aplicar un producto de postratamiento después del tratamiento para calmar su piel.



¿Puedo usar cremas o ungüentos en mi piel?

Para el tratamiento facial, deberá asegurarse de que su rostro esté limpio y libre de agua, cremas y aceites antes de usar IPL. Después de todos y cada uno de los tratamientos, aplique una crema calmante para enfriar la piel y ayudar a evitar cualquier irritación cutánea.



¿Puedo continuar con otros tratamientos, como depilación con cera?

No, debería evitarlos. Deje los pelos en los folículos durante al menos 3 días después de su tratamiento. Esto ayudará a reducir las posibilidades de una infección oportunista en los folículos dañados. El cabello se caerá naturalmente durante los siguientes días y semanas. Pero tenga en cuenta que el crecimiento del cabello ocurre a diferentes velocidades en diferentes áreas del cuerpo.



¿Qué debo tener en cuenta después de usar IPL?

Limpie su dispositivo a fondo y con cuidado siguiendo las instrucciones contenidas en su manual de usuario.

Para el rejuvenecimiento de la piel, es una vez a la semana durante 8 semanas, y después, ¿cómo se usa?

Es probable que no se necesiten más tratamientos durante varios años, especialmente si evita tomar el sol y si cuida su piel con protector solar.


Los resultados del tratamiento pueden durar hasta tres o cinco años con FAUSTINA 3IN1 IPL, con la opción de aplicar más tratamientos si lo desea.

¿Puedo tratar áreas con la lámpara de rejuvenecimiento de la piel y tratar las mismas áreas para la lámpara de depilación el mismo día, un tratamiento tras otro?

No recomendamos tratar la misma zona con una lámpara de rejuvenecimiento de la piel y una lámpara de depilación el mismo día. Debe dejar dos o tres días entre los dos tratamientos.

¿Puedo afeitarme entre tratamientos?

Sí, algo de pelo crecerá entre los tratamientos y está perfectamente bien afeitarse. Sin embargo, para obtener mejores resultados, le recomendamos que no realice ningún tipo de depilación, depilación, blanqueamiento ni tratamientos de electrólisis. El afeitado es su nuevo método de depilación favorito entre los tratamientos; cualquier otra cosa extrae el pelo del folículo y dificulta el proceso de IPL, que no desea. Si el cabello vuelve a crecer entre tratamientos, simplemente acorte el intervalo de tratamiento, pero no trate más de una vez cada 2 semanas, ya que esto solo aumentará el riesgo de irritación de la piel.

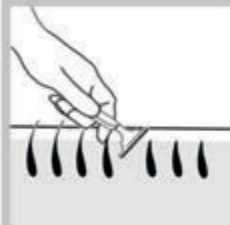

¿Qué tan pronto se pueden ver los resultados con la depilación IPL?

Todo depende del área que esté tratando, el crecimiento hormonal, el estilo de vida y la medicación. Los tratamientos para las piernas funcionan muy bien y verá una reducción mucho más rápida dentro de seis a nueve tratamientos. Dentro de un año a un año y medio, verá una muy buena reducción en otras áreas. Las caras tardan mucho más en tratarse. La razón de esto es el hecho de que el rostro humano es muy hormonal: en un centímetro cuadrado, hay casi quinientos folículos pilosos. Algunos de ellos están inactivos. Un nuevo folículo piloso se activará y comenzará a ver que el crecimiento del cabello vuelve a aparecer.

Repita el tratamiento cada 4 a 6 semanas, esto mantendrá la raíz del cabello inactiva y evitará que vuelva a crecer. Cuando continúe usando IPL, verá resultados permanentes a partir del tercer mes de tratamiento. Esto NO significa que no tendrá vello después de tres meses, solo que comenzará a notar que gran parte de su vello corporal no vuelve a crecer. Puede afeitarse entre sesiones de IPL, evite depilarse y depilarse inmediatamente después de sus tratamientos. Afeitarse es su nuevo método de depilación favorito: cualquier otra cosa sacará el vello de sus folículos y dificultará el proceso de IPL, lo que usted no desea.

Si el cabello vuelve a crecer entre tratamientos, simplemente acorte el intervalo de tratamiento, pero no trate más de una vez cada 2 semanas, ya que esto solo aumentará el riesgo de irritación de la piel.



¿Cómo FAUSTINA IPL estimula la producción de colágeno?

FAUSTINA 3-IN-1 con lámpara de rejuvenecimiento de la piel IPL utiliza una gama selectiva de longitudes de onda. La luz pulsada atraviesa la epidermis y penetra más profundamente en la piel, donde la energía luminosa daña el pigmento. Esto hace que las defensas naturales de la piel acudan al rescate. El cuerpo trabaja instintivamente para eliminar la melanina dañada y estimula los fibroblastos para producir nuevo colágeno y tensar las fibras de elastina, lo que ayuda a que la piel se vuelva más firme, más gruesa y con un aspecto más juvenil.



Garantía

Por si pasa algo ...

Período de garantía

.Unidad principal: La garantía de la unidad principal es de 1 año a partir de la fecha de compra.

.Lámpara (s): Las fallas de lámpara con más del 30% de disparos restantes causadas por razones no artificiales serán mantenidas por el fabricante.

Alcance de la garantía

Si el sistema está dentro de su período de garantía, el fabricante reemplazará su producto por uno nuevo después de verificar que no haya razones artificiales. No se cubren otras fallas que resulten de un uso anormal y maniobras forzadas.

Límites de garantía

Al solicitar mantenimiento gratuito para el producto que se encuentra dentro del período de garantía, los clientes deben mostrar un comprobante de compra válido (como una factura, tarjeta de garantía, cualquier tipo de recibo o extracto bancario, etc.)

No se proporciona mantenimiento gratuito para productos que se hayan dañado debido a un uso inadecuado o mala manipulación.

No cubriremos ninguno de los siguientes

.Defectos y daños generales provocados por incendios, terremotos, comportamiento de terceros, avería o mal uso por parte de los usuarios.

Uso bajo cualquier otra condición anormal y eventos impredecibles;

.Cualquier daño extendido causado por el uso de sus productos (como discrepancias comerciales, pérdida de beneficios, interrupción del negocio, incluida la pérdida de resultados por el uso inadecuado del sistema y el costo resultante del reemplazo del equipo, dispositivo o servicio, o reclamo requerido por los usuarios);

.Daño resultante de un usuario inadecuado que está fuera del contenido de las instrucciones enumeradas en este manual.

Esto incluye:

Las situaciones incontrolables requerían el servicio de piezas para resolver problemas que resultan del uso de accesorios, conexiones o sustitutos que no son vendidos por el fabricante o nuestra empresa, y los servicios requeridos para resolver problemas que resultan del desmontaje y reensamblaje inaceptables o ilegales de el instrumento sin las instrucciones adecuadas.;

.Defectos o daños resultantes de un entorno no adecuado para el producto.;

.Almacenamiento inadecuado por parte de los usuarios (como daños causados por bichos e infiltración de líquidos).

Servicio de información

Gracias por comprar con nosotros

Estimado cliente,

¡Gracias por adquirir nuestro producto! Para brindarle un servicio de la más alta calidad, consulte la información de contacto a continuación si tiene algún problema o problema con su dispositivo de belleza IPL multifunción FAUSTINA® recién comprado.

Email: support@labotest.co.uk

website: www.labotest.co.uk

Tarjeta de garantía

Complete los datos para realizar una reclamación

Nombre completo:

Nombre del producto:

Modelo:

Fecha de compra:

Comprovativo standard:

GB4706.1-2005

Adjunte comprobante de compra

Este producto cumple con los requisitos de calidad estándar después de la prueba y está aprobado para su lanzamiento.

**Make the world a little more
beautiful with IPL technology.**

LABOTEST

HOME BEAUTY DEVICES & LAB EQUIPMENT

Suite 503,
Crown House Business Centre
North Circular Road,
London, NW10 7PN,
United Kingdom

www.labotest.co.uk