

FAUSTINA®

MANUALE UTENTE | DISPOSITIVO IPL 3IN1 PER USO DOMESTICO

Modelli: HR_AC_SR | HR_2SR | HR_AC_2SR | 3SR



Depilazione | Liquidazione dell'acne | Ringiovanimento della pelle*

* Si prega di notare che le lampade possono variare a seconda del modello acquistato


LABOTEST



Benvenuto nel tuo nuovo

FAUSTINA[®] IPL

Nota: 1 lampada è già collegata al dispositivo principale.
È possibile controllare la funzione di ciascuna lampada sul retro.

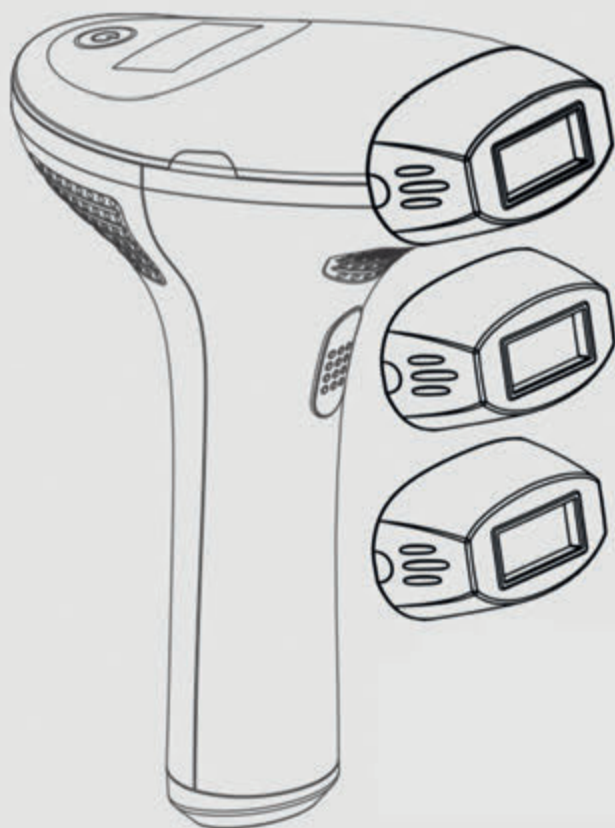

1x Rimozione peli


**1x Liquidazione
dell'acne**

**1x Ringiovanimento
della pelle**

Le lampade extra possono essere acquistate singolarmente e installate sul dispositivo se hai esaurito i flash o non hai acquisito tutte le funzioni con il tuo modello.

LaboTest Ltd. vende 4 diversi modelli FAUSTINA® IPL.

Controlla qual è il tuo:

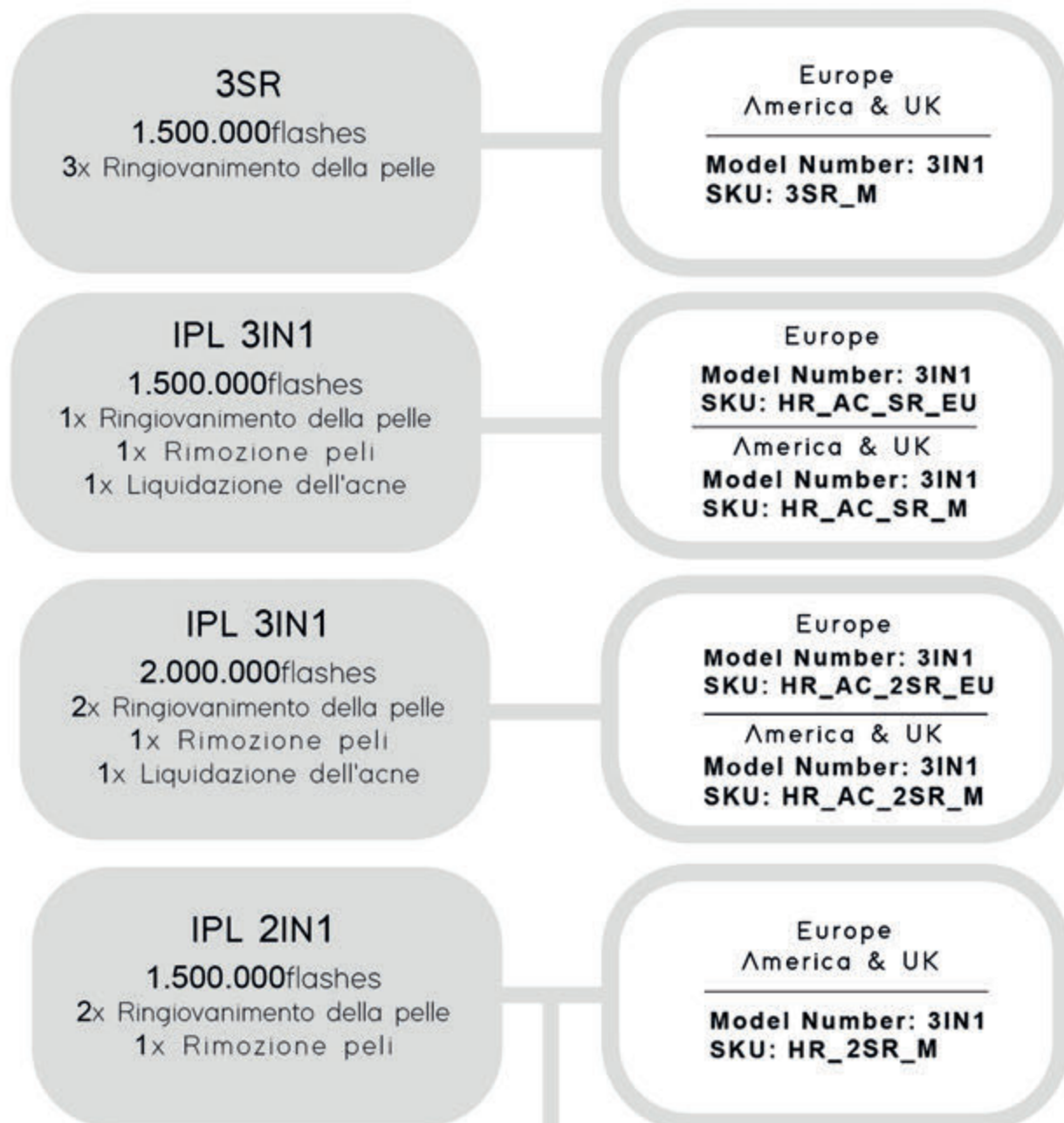

Sommario

Prefazione	1 - 2
Avviso sul prodotto	3 - 4
Informazioni sul prodotto	4 - 6
Avvertenze	7 - 8
Precauzioni	9 - 10
Come utilizzare FAUSTINA IPL	11 - 13
Modalità automatica e manuale	14
Test di sensibilità cutanea	15
Impostazioni energetiche	15
Procedura operativa	16 - 22
Domande frequenti prima di utilizzare il dispositivo	23 - 32
Domande frequenti dopo aver utilizzato il dispositivo	33 - 37
Garanzia	39 - 40
Informazioni sul servizio	41 - 42

Prefazione

Grazie per aver scelto il dispositivo di bellezza IPL (multifunzionale) FAUSTINA di LaboTest.

Questo dispositivo utilizza la tecnologia E-IPL (filtra le luci dannose e non valide per mantenere scatti efficaci per tutte le funzioni) e puoi ottenere la depilazione, il ringiovanimento della pelle e l'eliminazione dell'acne passando alla lampada della funzione appropriata. Questo prodotto è stato realizzato tenendo conto delle specifiche di efficienza, moda, salute e alta tecnologia. Preparati mentre FAUSTINA IPL segna l'inizio della tua clinica di bellezza privata.

Si prega di visualizzare e leggere questo manuale utente molto attentamente prima di utilizzare il dispositivo e di conservarlo al sicuro nel caso in cui sia necessario consultarlo in futuro.

In caso di problemi con il dispositivo, non esitare a contattarci sul nostro sito Web all'indirizzo www.labo-test.co.uk

Avviso sul prodotto



Questo manuale utente guiderà l'utente nell'utilizzo del dispositivo IPL FAUSTINA.

- Il produttore di questo prodotto segue strategie di sviluppo sostenibile. Ciò significa che si riservano il diritto di non informare i clienti quando cambiano la funzione, l'interfaccia e l'aspetto del prodotto.
- Se c'è una differenza tra la descrizione e il prodotto reale a causa di un aggiornamento, fare riferimento al prodotto reale.
- Utilizzare il dispositivo in base alle corrette fasi operative e alle impostazioni di trattamento.

Informazioni sul prodotto:

Contiene:

Unità principale x1, lampada x3, occhiali UV x1, adattatore
1x, manuale utente

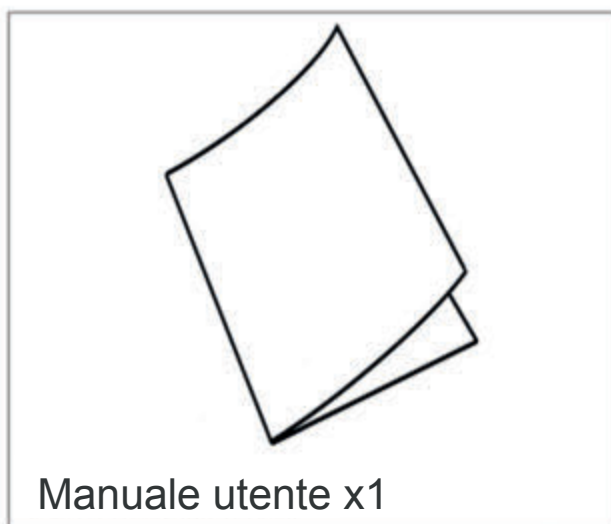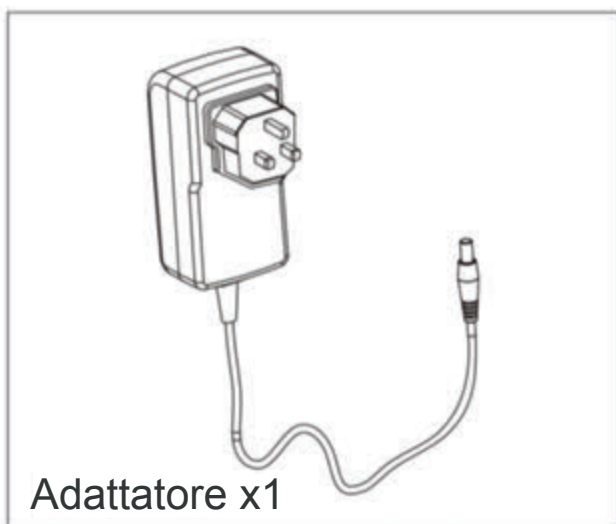


Funzioni

Funzione 1 - Depilazione


Funzione 2 - Ringiovanimento della pelle

Funzione 3 - Acne Clearance


Figura 1: lampade

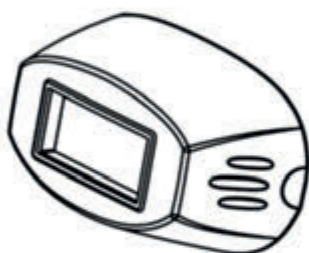

HR (Depilazione)

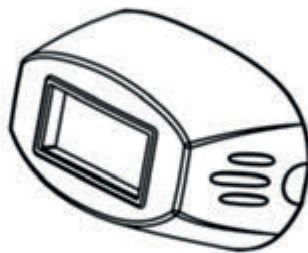

SR(Ringiovanimento
della pelle)

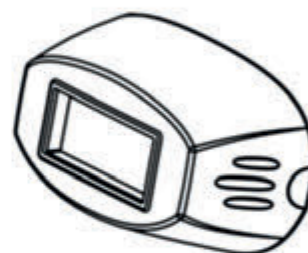

AC(Liquidazione
dell'acne)

Parametri

Potenza in ingresso: 36W

Tensione nominale: 100 V - 240 V.


Gamma di frequenza nominale: 50Hz / 60Hz

Temperatura di conservazione: 0 ° C - 45 ° C

Temperatura di lavoro: 5 ° C - 35 ° C

Umidità di lavoro: 25% - 75%

Struttura del prodotto: (Figura 2)

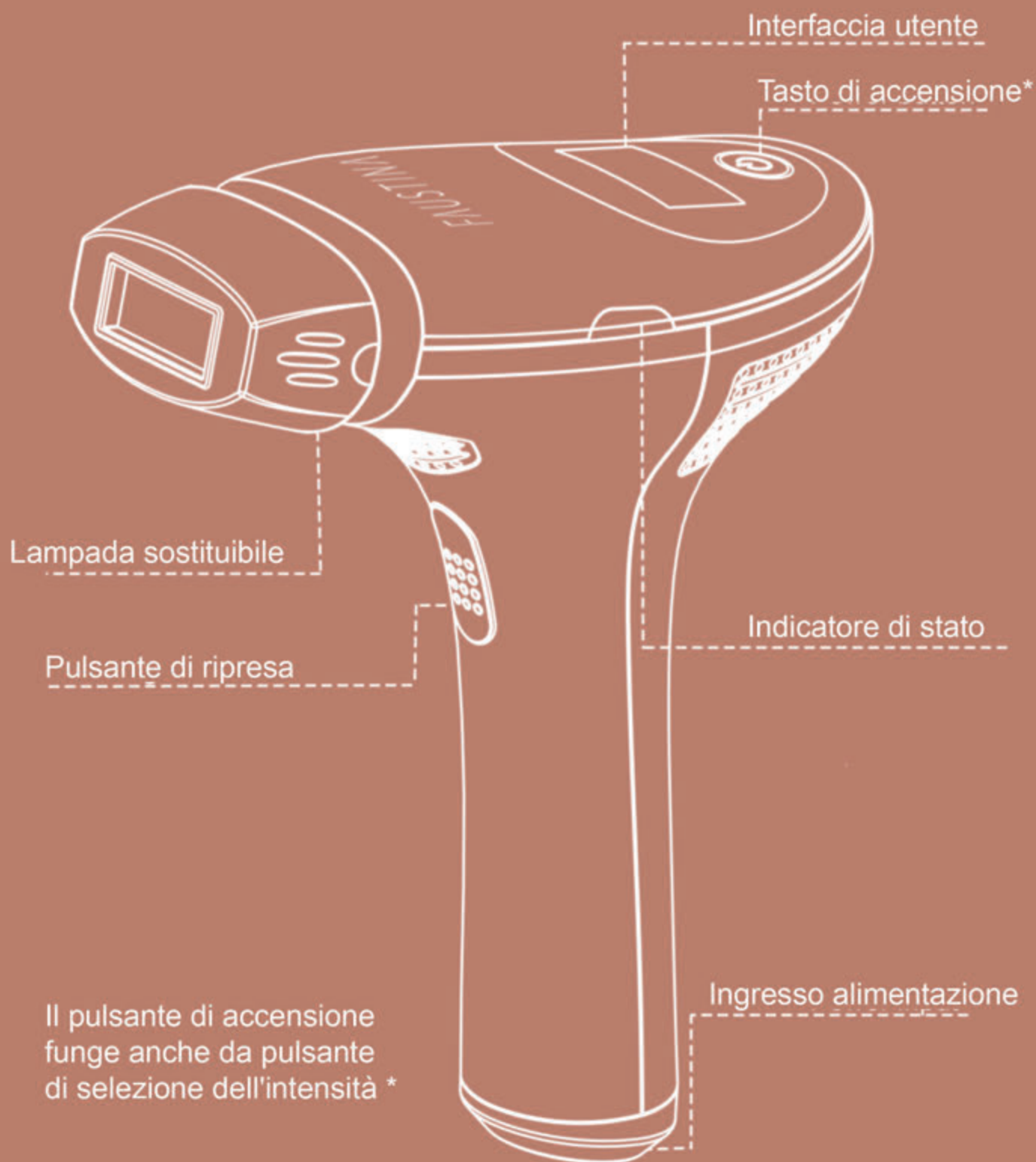

Avvertenze

Si prega di leggerli attentamente

NON USARE se hai meno di 18 anni.

Gli effetti dell'utilizzo del sistema in questa fascia di età non sono noti.



NON USARE se la pelle nella zona che si desidera trattare è abbronzata o bruciata. L'uso del dispositivo su pelle abbronzata o ustionata può provocare uno sbiancamento o uno scurimento temporaneo (o anche permanente) della pelle.



NON UTILIZZARE in caso di gravidanza, concepimento o allattamento. I cambiamenti ormonali si verificano durante la gravidanza e l'allattamento e potrebbero aumentare il rischio di lesioni o sensibilità della pelle.



NON USARE in caso di epilessia, convulsioni indotte dalla luce o emicrania. I lampi di energia potrebbero causare forti mal di testa ed emicranie.



NON USARE su tatuaggi, macchie marrone scuro o nere (come lentiggini scure, voglie, nei o verruche). I tatuaggi o le macchie scure possono assorbire troppa energia luminosa che potrebbe far gonfiare la pelle, lasciare vesciche temporanee o permanenti o scolorire la pelle. Può anche causare ustioni.



NON USARE la lampada HR su barbe maschili poiché ciò potrebbe causare risultati non uniformi. L'uso della lampada SR sulle aree dei capelli visibili può causare la rimozione di questi follicoli piliferi. Per prevenirlo, non illuminare direttamente l'area in cui crescono i capelli.



NON USARE la lampada FC su testa, orecchie, collo, capezzoli, genitali o intorno all'ano. **NON USARE** la lampada SR su testa, capezzoli, genitali o sopracciglia. L'uso in queste aree potrebbe causare gonfiore della pelle, vesciche o scolorimento temporaneo della pelle. Si sconsiglia l'uso della lampada SR sulla zona del collo, poiché è molto sensibile.

NON USARE se si dispone di una condizione della pelle attiva nell'area che si intende trattare. Ciò include acne (quando si utilizza la lampada HR o SR), piaghe, psoriasi, eczema, ustioni, herpes semplice, ferite o eruzioni cutanee. Queste condizioni possono rendere la pelle più sensibile ai trattamenti leggeri e potrebbero rendere i trattamenti scomodi o causare gonfiore della pelle, vesciche o infezioni. Se ritieni che le condizioni della pelle preesistenti siano guarite abbastanza da poter utilizzare il dispositivo, consulta prima il tuo medico o il dermatologo.

NON USARE il dispositivo se si ha una storia di formazione di cicatrici cheloidali, una sensibilità nota alla luce (fotosensibilità) o se si stanno assumendo farmaci che rendono la pelle più sensibile alla luce, inclusi i reagenti antinfiammatori non steroidei, ad es. Aspirine, ibuprofene, centaminofeni, tetracicline, fenotiazine, tiazidi, diuretici, sulfoniluree, idrossiacidi (AHAS), beta-idrossiacidi (BHAS), retin-A, accutane e / o retinoidi tipici.

NON USARE se si soffre di una malattia correlata alla fotosensibilità, come porfiria, eruzione polimorfica alla luce, orticaria solare, lupus, ecc. Queste condizioni rendono la pelle più sensibile al trattamento con la luce e potrebbero rendere il trattamento scomodo o causare gonfiore della pelle, vesciche, o infezioni.

NON consumare i seguenti medicinali se si intende procedere con i trattamenti IPL: Accutane, Roaccutane, Retin A, Vitamin B o AHA negli ultimi 6 mesi.

Precauzioni

Si prega di leggerli attentamente

Non è possibile accendere il dispositivo se non è collegata alcuna lampada. Scollegare prima il dispositivo dall'adattatore per sostituire la lampada. Durante questa operazione non coprire i fori di ventilazione per evitare il surriscaldamento.



Quando si utilizza la lampada per la depilazione, assicurarsi sempre di radere l'area da trattare.

Ti consigliamo di indossare gli occhiali di protezione UV forniti nella confezione durante il trattamento. Non guardare direttamente la luce o i flash per lunghi periodi di tempo.



Le lampade rottamate non possono essere riciclate. Si prega di trattare le lampade rottamate secondo le leggi e le ordinanze locali.



Prima di sottoporsi al trattamento, pulisci la pelle e assicurati che sia asciutta. Non applicare cosmetici poiché alcune sostanze chimiche potrebbero causare il malfunzionamento del dispositivo o non funzionare come previsto.



Regola il livello di energia da basso ad alto. A condizione di sicurezza, maggiore è il livello di energia, migliori saranno i risultati. Dopo il trattamento, è normale che si verifichino arrossamenti. In questi casi, si consiglia di applicare un impacco di ghiaccio sulle aree interessate.



Utilizzare una crema idratante per la pelle e un prodotto di protezione solare dopo i trattamenti di fototerapia.

Al termine del trattamento e dopo aver spento il dispositivo, utilizzare un batuffolo di cotone o un panno umido per pulire la finestra del trattamento. Questo può impedire che i capelli si induriscano sulla superficie della lampada, influenzando successivamente l'energia di ogni scatto.

Utilizzare solo un panno morbido e asciutto o un panno in microfibra per pulire l'esterno del dispositivo. Puoi anche usare una salvietta senza alcool o un panno umido.



Assicurati che il sistema, gli accessori e le lampade della tua unità non vengano a contatto con acqua o umidità.

Conservare il dispositivo e i suoi accessori in un ambiente asciutto e ventilato e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

Non infilare strumenti metallici o qualsiasi altro tipo di oggetto nei fori di emissione del calore. Ciò rappresenta un rischio di scosse elettriche.



Nel caso in cui il dispositivo venga immerso o in altro modo immerso in acqua, rispedirlo al produttore per un esame per determinare se è riparabile. Nel caso in cui il sistema sia acceso quando è bagnato, **SCOLLEGARE** immediatamente il sistema prima di toccare il dispositivo per la propria salute e sicurezza.

NON tentare di smontare e riparare a propria discrezione.

Se il dispositivo non funziona normalmente, restituire l'unità e gli accessori al produttore, dove saranno esaminati da personale qualificato.



Come utilizzare FAUSTINA

è così semplice - lo adorerai.

- 1** Pulire la finestra di uscita della luce della cartuccia con un panno umido o un batuffolo di cotone. Questo viene fatto per rimuovere eventuali capelli e polvere dalla finestra di trattamento.



- 2** Tenere la lampada su entrambi i lati, come illustrato di seguito, quindi inserire o estrarre con un movimento lineare.



- 3** Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo



- 4** Posizionare il sistema su un tavolo o un'area vicino a una presa elettrica. Allontanare eventuali liquidi dall'area.


- 5** Assicurarsi che la lampada sia installata correttamente prima di accenderla.



- 6** Dopo aver collegato il cavo di alimentazione a una presa elettrica, l'indicatore di stato inizierà a lampeggiare lentamente.



- 7** Premere il pulsante di accensione per oltre 2 secondi per accendere il dispositivo. Dopo averlo acceso, sentirai le ventole e vedrai il display LCD accendersi. Il tipo di lampada, gli scatti rimanenti, il livello di energia, l'icona del termometro e l'icona della ventola verranno visualizzati e indicati sul display LCD. Gli indicatori di stato continueranno a lampeggiare, a indicare che il dispositivo si sta preparando per l'uso. Una volta pronto, l'indicatore si spegnerà. Quando la finestra di trattamento entra in contatto con la pelle, l'indicatore diventa blu, il che significa che il dispositivo è pronto per emettere lampi.

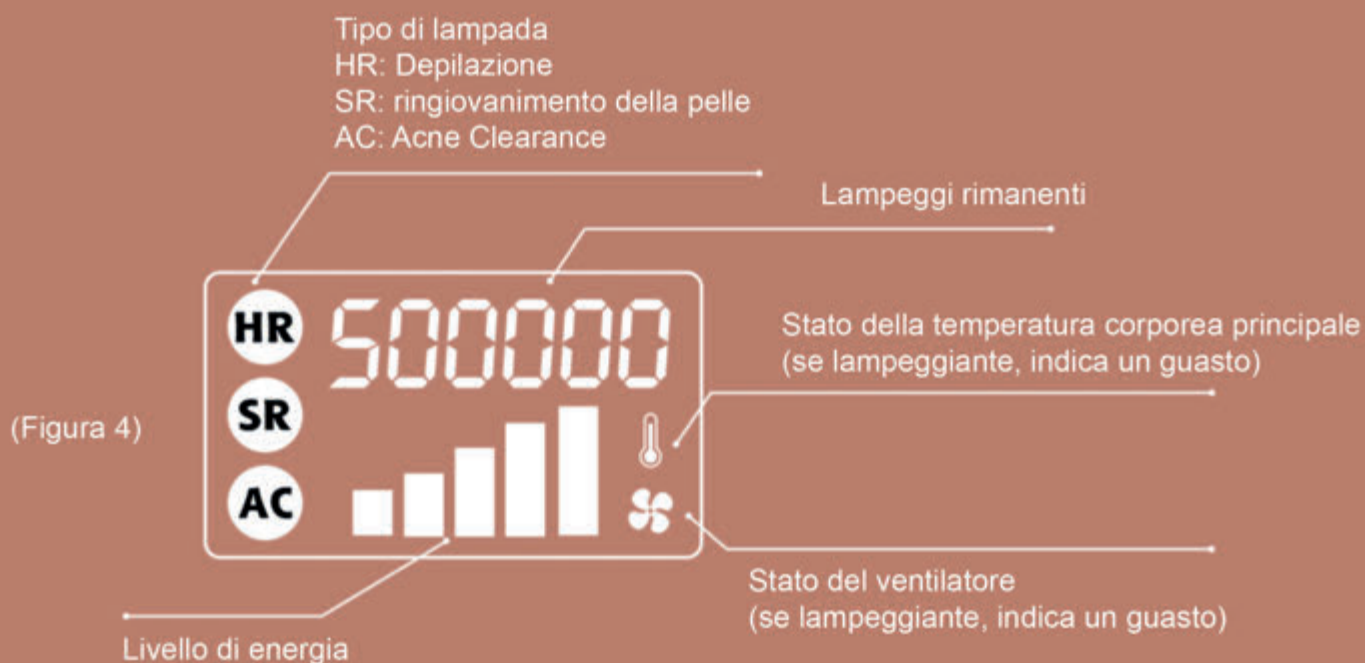

- Premere il pulsante di accensione per regolare il livello di energia da basso ad alto: il livello 1 è il più basso e il livello 5 è il più alto
- Assicurati che la finestra di trattamento sia posizionata saldamente contro la tua pelle. L'indicatore di stato si accende quando la finestra di trattamento si trova di fronte a un'area adatta.



Nota: il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inattività.

Modalità automatica e manuale

Il dispositivo FAUSTINA IPL ha due modalità: automatica e manuale.

Manuale è la modalità predefinita.

Per attivare la modalità automatica:

- Premere il pulsante del flash per alcuni secondi.



- Quando questa modalità è attivata, l'icona della funzione sull'interfaccia utente inizierà a lampeggiare.

A seconda della modalità (HR / SR / AC)



- È ora possibile iniziare a far scorrere la finestra della lampada sull'area che si desidera trattare e il dispositivo lampeggerà automaticamente.

Questa modalità è particolarmente utile per l'ombelico, le gambe e le cosce.



- Se si desidera tornare alla modalità manuale, premere il pulsante flash per uscire dalla modalità automatica.

Premere il pulsante di scatto per alcuni secondi.



Test di sensibilità cutanea

Nel caso in cui si utilizzi IPL per la prima volta

Se stai usando questo sistema per la prima volta o su una nuova zona del tuo corpo, scegli una piccola area vicina all'area che intendi trattare, allo scopo di eseguire un test di sensibilità cutanea. Usa il livello più basso (1). Segui le istruzioni per il trattamento di seguito, ma assicurati di emettere solo 2-3 colpi. Dopo il test cutaneo, attendi circa 60 minuti e controlla la tua pelle per eventuali reazioni. Se dopo 60 minuti la pelle appare normale e non ci sono arrossamenti o altre reazioni cutanee, allora sei pronto per eseguire un trattamento completo.

Impostazioni energetiche

Calibrazione resa più facile con un display LCD

Scegli il livello di energia adatto in base alla tua tolleranza cutanea e aumenta gradualmente il livello di energia da uno a cinque. Se non c'è alcun dolore o reazione intollerabile di alcun tipo, puoi sentirti libero di aumentare gradualmente l'energia. Non utilizzare il dispositivo sulla stessa identica parte della pelle lampeggiando più volte. Ciò potrebbe causare troppo calore e causare gonfiore della pelle, vesciche o cambiamenti temporanei / permanenti nel colore della pelle. Dopo ogni flash, spostare lentamente la finestra di trattamento su un punto della pelle adiacente. Prima di tornare su una macchia cutanea precedentemente trattata, attendere almeno 20 secondi.

Procedura operativa

Lo scopo di ogni lampada

FAUSTINA IPL - Lampada per la depilazione
(Installa la lampada HR)



1. Scopo della lampada

Per la rimozione dei peli delle labbra, delle ascelle, dei peli del corpo e delle gambe, i peli in alcuni punti influenzano il tuo aspetto (ad esempio sulla fronte e sulla zona bikini).


**L'effetto è diverso a seconda del colore della pelle.
Questo dispositivo non è adatto per capelli rossi
(zenzero), grigio / bianco e biondo bianco.**

Guide per pelle e capelli

Pelle								
Capelli								

2 . Procedura operativa

1 Radi e pulisci l'area che intendi trattare.

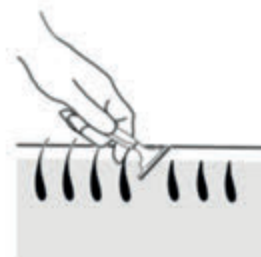

2 Indossare occhiali di protezione UV per evitare di essere abbagliati.



3 Cerca una presa di corrente e allontana i liquidi dall'area. Inserire l'adattatore nella presa di corrente e il cavo di alimentazione nel dispositivo.

4 Scegli un livello di energia adeguato
(Fare riferimento alle pagine 13-14 - Iniziare da un livello basso)



5 Inizia il trattamento sulla zona che desideri trattare. Ripeti questo passaggio 2-3 volte. Non riprendere ripetutamente lo stesso punto.



SUGGERIMENTO PRO: per trattare aree più grandi, puoi utilizzare la modalità automatica. Per attivare questa modalità, fare riferimento a pagina 14. Ciò è particolarmente utile per l'ombelico, le gambe e le cosce.

6 Applicare la crema anti-capelli dopo il trattamento (opzionale).

7 Spegnerne il dispositivo e utilizzare un panno umido o un batuffolo di cotone per pulire la finestra di trattamento.

8 Riponi il dispositivo e i suoi accessori nella loro scatola e conservali in un luogo fresco, asciutto e sicuro. Tenere lontano dalla portata di bambini e liquidi.



3. Raccomandazioni per il trattamento

7-9 trattamenti


Nei primi 3 trattamenti, fai un trattamento ogni settimana.

Nei seguenti 4-9 trattamenti, eseguire un trattamento ogni 2-3 settimane.

Durante il periodo di mantenimento, eseguire un trattamento ogni 2 mesi sulle zone con visibile crescita dei peli.

FAUSTINA IPL - Lampada per il ringiovanimento della pelle

(Installa lampada SR)

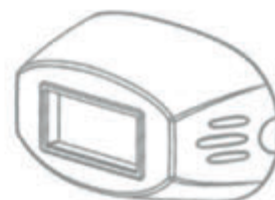

1. Scopo della lampada

Per pelle ruvida e invecchiata, pelle scura, pori dilatati, rughe, mancanza di elasticità, luminosità e capillari rotti del viso.

2. Procedura operativa

- 1 Pulite l'area da trattare e il filtro della lampada con un batuffolo di cotone.**
- 2 Indossare occhiali di protezione UV per evitare abbagliamenti.**
- 3 Scegli un livello di energia adatto (Fare riferimento alle pagine 13-14 Iniziare da un livello basso)**
- 4 Posizionare saldamente la finestra di trattamento contro la pelle e trattare aree diverse man mano che si procede.
Non riprendere ripetutamente lo stesso punto.**
- 5 Inizia il trattamento. Ripeti il passaggio 4 per 2-3 volte.**



6 Applicare la crema idratante dopo il trattamento (facoltativo / consigliato)



7 Spegner il dispositivo e utilizzare un panno umido o un batuffolo di cotone per pulire la finestra di trattamento.



8 Riporre il dispositivo e i suoi accessori nella confezione e riporlo in un luogo fresco, asciutto e sicuro. Tenere lontano da bambini e liquidi.

3. Raccomandazioni per il trattamento

8 trattamenti - Un trattamento ogni settimana

FAUSTINA IPL - Lampada per l'acne

(Installa la lampada AC)



1. Scopo della lampada

Per pelli grasse con papula, impetigine, tubero e acne infiammatoria cistica.

2. Procedura operativa

- 1** Pulite l'area da trattare e il filtro della lampada con un batuffolo di cotone.
- 2** In caso di acne infiammatoria prima del trattamento, pulire le aree interessate con prodotti appropriati.
- 3** Indossare occhiali di protezione UV per evitare abbagliamenti.
- 4** Scegli un livello di energia adatto
(Fare riferimento alle pagine 13-14 Iniziare da un livello basso)
- 5** Posizionare la finestra di trattamento saldamente contro la pelle. Assicurati che ogni intervallo di scatto sia di almeno 20 secondi.



6 Spegnerre il dispositivo una volta terminato. Mantieni la pelle pulita e applica una crema idratante dopo il trattamento.

7 Utilizzare un panno umido o un batuffolo di cotone per pulire la finestra di trattamento.



8 Riporre il dispositivo e i suoi accessori nella confezione e riporlo in un luogo fresco, asciutto e sicuro. Tenere lontano da bambini e liquidi.



3. Raccomandazioni per il trattamento

10 trattamenti - Un trattamento ogni tre giorni.

FAQs

Domande frequenti prima di utilizzare FAUSTINA IPL

Non ho mai usato trattamenti di epilazione IPL. È davvero sicuro?

Punti chiave per la sicurezza dei nostri IPL:

- 1- La rasatura in anticipo eviterà che la pelle si bruci o si iriti durante il processo. La luce del tuo dispositivo sarà in grado di indirizzare la melanina nei tuoi capelli molto più facilmente in questo modo, poiché agisce in modo simile a un conduttore.
- 2- Per il trattamento del viso, è necessario assicurarsi che il viso sia pulito e privo di acqua, creme e oli prima di utilizzare l'IPL.
- 3- Usalo sul tipo di pelle / capelli corretto, scegli un livello di energia adatto in base alla tua tolleranza cutanea e aumenta gradualmente il livello di energia da uno a cinque. Se non c'è alcun dolore o reazione intollerabile di alcun tipo, puoi sentirti libero di aumentare gradualmente l'energia.
- 4- Non utilizzare il dispositivo sulla stessa identica parte della pelle lampeggiando più volte. Ciò potrebbe causare troppo calore e causare gonfiore della pelle.
- 5- Le macchine IPL domestiche devono essere utilizzate su una pelle sana e normale. non utilizzare la depilazione IPL sui nei. non utilizzare la depilazione IPL Se hai il diabete o se sei sottoposto a chemioterapia o hai consumato farmaci fotosensibili o sei epilettico. È importante informare in anticipo il medico di famiglia o uno specialista se si stanno assumendo determinati farmaci prima di utilizzare l'IPL.

Quindi IPL abbastanza sicuro, giusto?

Sì, il nostro sistema domestico di IPL è perfettamente sicuro a condizione che vengano utilizzati nel modo prescritto e sul giusto tipo di pelle e capelli.



Chi può usare IPL - è solo per le donne?

È per chiunque abbia i peli superflui. Per donne e uomini che vogliono sembrare più giovani con una pelle dall'aspetto più sano. Per chi vuole eliminare arrossamenti, macchie senili, arrossamenti cronici o rughe. IPL può funzionare per te!



I risultati della depilazione IPL di FAUSTINA 3IN1 sono permanenti? Questo significa che i miei capelli non ricresceranno mai più?

Quando i peli ricresceranno, saranno più chiari, più fini e meno numerosi. Dopo quattro o sei trattamenti, puoi aspettarti una marcata riduzione dei capelli. Qualsiasi ricrescita può essere gestita con trattamenti di ritocco ogni sei-dodici mesi.

Posso usare IPL durante la gravidanza?

Il trattamento non può essere effettuato durante la gravidanza e l'allattamento. Ciò è dovuto ai cambiamenti ormonali e di pigmentazione causati dalla gravidanza. Si consiglia di sottoporsi al trattamento dopo l'allattamento e dopo aver completato 2 cicli di mestruazioni.



Posso utilizzare il dispositivo IPL durante le mestruazioni?

Durante le mestruazioni, il trattamento della zona pubica non può essere effettuato.

Posso usare IPL se ho una certa condizione?

Non è possibile utilizzare IPL se si è consumato, applicato o se si è avuto quanto segue:

- Accutane, Roaccutane, Retin A, Vitamin B o AHA negli ultimi 6 mesi
- avere la pelle bruciata dal sole, dal vento, secca, screpolata, irritata o rotta o qualsiasi ferita aperta nell'area da trattare
- Avere piaghe, verruche, ulcere, nei, voglie o qualsiasi tatuaggio nell'area da trattare

Ha subito un trattamento con radiazioni (ad esempio: abbronzatura UV), elettrolisi o eccessiva esposizione al sole negli ultimi 6 mesi

- Ha preso il sole in eccesso nell'ultima settimana
- Ha subito una procedura chirurgica negli ultimi mesi
- Sei incinta o stai allattando

Nota: evitare di nuotare in acqua fortemente clorata immediatamente prima di una sessione di trattamento IPL.

Evita esfolianti, microdermoabrasione o peeling per 1 settimana prima delle sessioni di trattamento.

In quali casi mi consiglia di non sottopormi a trattamenti IPL?

Se hai il diabete - Le persone con diabete dovrebbero capire che la loro condizione compromette il loro sistema immunitario. Pertanto, il processo di guarigione dei possibili effetti negativi richiederà più tempo del solito. Anche i rischi di infezione sono la massima preoccupazione.

Se sei sottoposto a chemioterapia - I pazienti attualmente sottoposti a chemioterapia possiedono anche un sistema immunitario compromesso che li rende non ideali per i trattamenti IPL.

Se hai consumato farmaci fotosensibili - Ci sono una manciata di farmaci fotosensibili che possono potenzialmente intensificare la sensibilità o la risposta ai trattamenti IPL.

Se sei epilettico: la luce del trattamento può scatenare un attacco.

È importante informare in anticipo il medico di famiglia o uno specialista se si stanno assumendo determinati farmaci prima di utilizzare l'IPL.



Qual è l'età minima consigliata?

Non esiste un'età minima o massima per il trattamento IPL. Tuttavia, i bambini di età inferiore ai 18 anni non devono utilizzare dispositivi IPL o sottoporsi a trattamenti. Questo perché gli equilibri ormonali nel corpo sono instabili e la crescita di nuovi capelli è rapida.

+18

Posso utilizzare dispositivi IPL per la depilazione della zona bikini?

È sicuro e delicato utilizzare l'IPL intorno alla zona bikini per eliminare i peli superflui. Che tu preferisca un brasiliano (solo una ciocca di capelli) o un look hollywoodiano completo; forse solo riordinare i bordi. Con IPL, puoi goderti permanentemente una pelle liscia e dimenticare i costosi trattamenti del salone.



La luce lampeggiante danneggerà i miei occhi?

Il sistema di sicurezza dei nostri prodotti è stato sviluppato nel dispositivo, rendendo la luce lampeggiante innocua per gli occhi. Usa il dispositivo in una stanza ben illuminata in modo che la luce sia meno abbagliante per i tuoi occhi. Non è necessario indossare occhiali protettivi durante l'uso. Non utilizzare mai l'IPL nell'area intorno agli occhi o per il trattamento delle sopracciglia. Questa è l'unica cosa che dovresti ricordare.



Come preparare la pelle prima del trattamento IPL?

Dovresti pretrattare la pelle rimuovendo i peli dalla superficie della pelle lo stesso giorno del trattamento o il giorno prima.

Per ottenere i migliori risultati, ti consigliamo di non eseguire alcuna forma di trattamenti di ceretta, spiumatura, sbiancamento ed elettrolisi. La rasatura è il tuo nuovo metodo di depilazione preferito prima e tra i trattamenti; qualsiasi altra cosa tira i capelli dal follicolo e ostacola il processo IPL, cosa che non vuoi. Se i peli ricrescono tra i trattamenti, accorcia semplicemente l'intervallo di trattamento, ma non trattare più spesso di una volta ogni 2 settimane, poiché ciò aumenterà solo il rischio di irritazione della pelle.

Qual è la differenza tra la modalità Stamp e la modalità Glide?

Il dispositivo ha due modalità di applicazione: modalità Timbro e modalità Glide. La modalità timbro è per le aree piccole e ossee che sono più difficili da trattare (ad esempio ginocchia, ascelle). Posizionare l'apparecchio sulla pelle, basta premere e lampeggiare, quindi spostare la mano sull'area vicina successiva che deve essere trattata.

La modalità Glide serve a trattare aree più ampie (ad es. Gambe). Posiziona l'apparecchio contro la pelle, mentre tieni premuto il pulsante del flash durante l'applicazione: fai scorrere l'apparecchio e lampeggerà mentre procedi. Questo rende il trattamento di grandi aree più facile e veloce.

L'IPL è adatto a tutti i tipi di pelle e capelli?

L'IPL di solito non è adatto per i toni della pelle più scuri, perché c'è molta più melanina nella pelle che la luce prenderà di mira e si riscalderà. Ciò provoca dolore e può danneggiare la pelle. Questo dispositivo è dotato di un tester tattile e del tono della pelle integrato e di una forza del flash regolabile, adattabile al tipo di pelle.

Più scuro è il colore dei tuoi capelli, meglio è, perché i capelli scuri hanno un sacco di pigmento scuro di melanina. È questo che la luce prende di mira e la riscalda per danneggiare il follicolo e fermare la crescita dei capelli. Poiché i capelli biondi, grigi e bianchi non contengono melanina o abbastanza, i trattamenti IPL non funzioneranno mai su questi colori di capelli. I capelli rossi contengono un diverso tipo di melanina che non risponde all'IPL.



Devo rimuovere i peli del viso prima di usare l'IPL?

Come per il corpo, è importante quando si utilizza l'IPL che l'energia della luce venga incanalata nei follicoli piliferi del corpo nel modo più efficiente. Questo può essere fatto radendosi.

Si può utilizzare FAUSTINA 3IN1 se si dispone di piastre metalliche?

FAUSTINA 3IN1 IPL raggiunge il derma profondo e lo strato di grasso sottocutaneo superficiale. Non penetra abbastanza in profondità da influenzare o causare dolore o problemi con qualsiasi metallo nel tuo corpo (ad esempio le viti metalliche sono solitamente più profonde di quello, nelle strutture ossee sotto il muscolo ..) È sicuro usare FAUSTINA 3IN1 dove nelle gambe, braccia o anche piastre metalliche nel petto ...

FAUSTINA 3IN1 funziona su capelli chiari e carnagione chiara?

Sì, puoi usarlo per i toni della pelle chiara, ma sfortunatamente l'IPL non funziona per tutti i colori dei capelli e le tonalità della pelle. È importante notare che se hai i capelli rosso / zenzero, grigio / bianco o biondo-bianco, l'IPL non funzionerà per te.


La rimozione dei peli IPL funziona mirando alla melanina all'interno della radice dei tuoi capelli, che manca a tutti e 3 questi colori di capelli, rendendo di fatto la tecnologia inutile.

Ma non disperare!

Puoi ancora usare FAUSTINA 3IN1 per altri scopi, come ringiovanimento della pelle, pelle ruvida, invecchiata, pelle scura, pori dilatati, rughe, mancanza di elasticità, luminosità, capillari rotti e riduzione dell'acne! FAUSTINA 3IN1 ha dimostrato di essere molto efficace in questi domini.

Quali risultati posso aspettarmi?

Se i tuoi trattamenti sono coerenti, otterrai una pelle duratura, liscia e senza peli. Tieni presente che ci vorranno più trattamenti per iniziare a vedere i risultati: ci vuole tempo. Questo perché i nostri follicoli piliferi seguono i propri cicli di crescita individuali. Ma ti promettiamo che vedrai i risultati straordinari che portano un sorriso sul tuo viso.

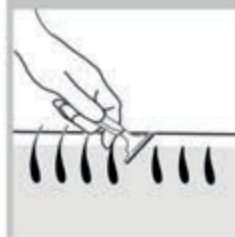

le

le

le

lf



FAUSTINA 3IN1 è sicuro da usare per ringiovanire la pelle su pelli medio-scuere?

Il modo migliore è scegliere una piccola area vicino all'area che si intende trattare, allo scopo di eseguire un test di sensibilità cutanea.

Utilizzare il livello FAUSTINA 3IN1 più basso (1). Segui le istruzioni per il trattamento di seguito, ma assicurati di emettere solo 2-3 colpi. Dopo il test cutaneo, attendi circa 60 minuti e controlla la tua pelle per eventuali reazioni.

Se dopo 60 minuti la pelle appare normale e non ci sono arrossamenti o altre reazioni cutanee, allora sei pronto per eseguire un trattamento completo e aumentare gradualmente il livello di energia da (1) a (2).

Se non c'è alcun dolore o reazione intollerabile di alcun tipo, puoi sentirti libero di aumentare gradualmente l'energia.



Quanti joule è FAUSTINA 3IN1 e può sbarazzarsi dei capillari rotti?

La potenza: 3,5 - 5,1 j / cm² o 19,89 joule per la finestra della lampada. questo fa di FAUSTINA 3IN1 in cima agli IPL simili sul mercato.

Sì, è possibile utilizzare la lampada SR allegata a FAUSTINA 3IN1 per questo scopo ...

Come funziona? L'energia luminosa viene applicata alla pelle dove viene prontamente assorbita dai vasi sanguigni, riscaldandoli fino al punto in cui vengono distrutti. Dopo il trattamento, i vasi si schiariscono rapidamente quando vengono riassorbiti dall'organismo, lasciando poca o nessuna traccia della lesione originale.



Alcuni piccoli capillari e vene scompaiono improvvisamente. Tuttavia, sono necessari 1-7 trattamenti, un trattamento ogni settimana. Alcuni capillari e vene sono più visibili dopo il trattamento, segno che sono distrutti e scompaiono entro poche settimane.

Ci sono 5 livelli di energia per adattarsi a un'ampia gamma di trattamenti diversi (pelle ruvida e invecchiata, pelle scura, pori dilatati, rughe, mancanza di elasticità e luminosità). Puoi aumentare gradualmente il livello di energia da uno a cinque se non c'è alcun dolore o reazione intollerabile di alcun tipo

Ho la carnagione da media a scura, posso usare FAUSTINA 3IN1?

Sfortunatamente, potrebbe non funzionare per le persone con pelle da marrone molto scuro a nera. Ma, per le persone con pelle da chiara a marrone-scura, è sicuro ed efficace



Si può usare FAUSTINA 3IN1 anche sul viso?

FAUSTINA 3IN1 è sicura per il viso. Funziona efficacemente sul labbro superiore

Non dovrebbe essere usato vicino agli occhi. per gli uomini, si sconsiglia l'uso sulle barbe. L'uso su barbe maschili può portare a risultati irregolari.

Con FAUSTINA 3IN1 puoi utilizzare le lampade Ringiovanimento della pelle e Acne Clearance per invertire i danni del sole, trattare le lesioni vascolari, ridurre le rughe, migliorare il contorno del viso, stringere i pori, aumentare la produzione di collagene ed elastina, rassodare la pelle, ridurre la comparsa di macchie solari, lentiggini, ridurre il gravità dell'acne, della pelle infiammata e dell'escrezione di sebo.

L'IPL può rassodare la pelle del collo?

I risultati dell'IPL per rassodare la pelle del collo sono spesso sottili e richiedono più sessioni di trattamento.



Qual è la differenza o la lunghezza d'onda della depilazione rispetto al ringiovanimento della pelle e alla rimozione dell'acne Lampada FAUSTINA 3IN1?

La lunghezza d'onda per le lampade FAUSTINA 3in1 è la seguente:

Rimozione dei capelli: 530 ~ 1100 nm, ringiovanimento della pelle: 560 ~ 1100 nm, trattamento dell'acne □ 400 ~ 700 nm.

Potenza: 3,5 - 5,1 j / cm²

Oltre alle lunghezze d'onda, al flusso di energia j / cm², ci sono molti fattori per indirizzare in modo più selettivo gli elementi cellulari o strutturali desiderati tra cui sequenze di impulsi, durata dell'impulso, tempo di ritardo dell'impulso, filtrazione che viene utilizzata per ogni trattamento.

Se usi la luce per il trattamento della pelle sul viso, vicino all'attaccatura dei capelli, rimuoverà anche i peli?

Non consigliamo di utilizzare la modalità di ringiovanimento della pelle sopra o vicino all'attaccatura dei capelli, ciò provocherà la rimozione dei peli nell'area che hai sparato.

La modalità SR rimuove le macchie marroni?

La modalità SR per FAUSTINA 3IN1 IPL aiuta a trattare le macchie scure riscaldando selettivamente il pigmento, quindi l'area danneggiata riscaldata verrà sollevata sulla superficie della pelle dove viene rimossa dal processo di esfoliazione naturale della pelle. Le macchie marroni diventeranno inizialmente più scure nelle prossime 24 ore, quindi svaniranno lentamente nelle settimane successive.



Per quanto tempo dovresti smettere di usare trattamenti topici per la pelle (ad esempio Retin A, vitamina B o AHA) prima di utilizzare il laser per il ringiovanimento della pelle?

Il nostro IPL FAUSTINA è completamente sicuro se utilizzato secondo il nostro manuale. Tuttavia, non assumere i seguenti medicinali se si intende procedere con un trattamento IPL, poiché potrebbero verificarsi effetti collaterali: Accutane, Roaccutane, Retin A, Vitamin B o AHA negli ultimi 6 mesi.

Devo usare un gel conduttivo?

Non c'è bisogno di gel conduttivo. Dovrai assicurarti che la tua pelle sia pulita e priva di acqua, creme e oli prima di utilizzare FAUSTINA IPL. Dopo ogni trattamento applicare una crema lenitiva per far raffreddare la pelle e per evitare qualsiasi irritazione cutanea.



FAQs

Domande frequenti dopo l'IPL

Cosa devo aspettarmi dopo il mio trattamento IPL e cos'è l'assistenza post-trattamento?

La tua pelle potrebbe essere leggermente rosa o rossa subito dopo il trattamento e potresti avvertire un leggero gonfiore che dovrebbe ridursi in pochi giorni.

Per le prossime 24 ore, consigliamo:

- Niente bagni caldi
- Non nuotare o prendere il sole
- Nessun abbigliamento stretto
- Nessuna applicazione di prodotti profumati inclusi deodorante, antitraspirante, autoabbronzante o trucco sulla zona trattata
- Nessun lavaggio o sfregamento dell'area trattata (questo può causare un'infezione batterica)

Evita gli sport violenti per 24-48 ore. Idrata il tuo corpo bevendo molta acqua.

E le risposte della pelle?

Questi sono spesso temporanei e scompaiono entro 24 ore dal trattamento. È possibile applicare un prodotto post-trattamento dopo il trattamento per lenire la pelle.




Posso usare creme o unguenti sulla mia pelle?

Per il trattamento del viso, è necessario assicurarsi che il viso sia pulito e privo di acqua, creme e oli prima di utilizzare l'IPL. Dopo ogni trattamento applicare una crema lenitiva per far raffreddare la pelle e per evitare qualsiasi irritazione cutanea.



Posso procedere con altri trattamenti, come l'epilazione, la ceretta o il tweet?

No, dovresti evitarli. Lascia i peli nei follicoli per almeno 3 giorni dopo il trattamento. Ciò contribuirà a ridurre le possibilità di un'infezione opportunistica nei follicoli danneggiati. I capelli cadranno naturalmente nei giorni e nelle settimane seguenti. Ma nota che la ricrescita dei capelli si verifica a velocità diverse in diverse aree del corpo.

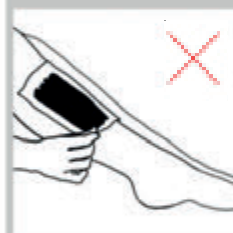

Cosa devo tenere a mente dopo aver utilizzato IPL?

Pulisci il tuo dispositivo accuratamente e attentamente seguendo le istruzioni contenute nel tuo manuale utente.

Per il ringiovanimento della pelle, è una volta alla settimana per 8 settimane, dopodiché come usarlo?


È probabile che non saranno necessari ulteriori trattamenti per diversi anni, soprattutto se eviti di prendere il sole e se ti prendi cura della tua pelle usando la protezione solare. I risultati del trattamento possono durare fino a tre-cinque anni utilizzando FAUSTINA 3IN1 IPL, con la possibilità di applicare ulteriori trattamenti se lo desideri.

Posso trattare aree con la lampada per il ringiovanimento della pelle e trattare le stesse aree con la lampada per la depilazione nello stesso giorno, un trattamento dopo l'altro?

Non consigliamo di trattare la stessa area con una lampada per il ringiovanimento della pelle e una lampada per la depilazione nello stesso giorno. Dovresti lasciare due o tre giorni tra i due trattamenti.

Posso radermi tra i trattamenti?

Sì, alcuni peli cresceranno tra i trattamenti ed è perfettamente corretto radersi. Tuttavia, per ottenere i migliori risultati, ti consigliamo di non eseguire alcuna forma di trattamenti con ceretta, spiumatura, sbiancamento ed elettrolisi. La rasatura è il tuo nuovo metodo di depilazione preferito tra i trattamenti; qualsiasi altra cosa tira i capelli dal follicolo e ostacola il processo IPL, cosa che non vuoi. Se i peli ricrescono tra i trattamenti, accorcia semplicemente l'intervallo di trattamento, ma non trattare più spesso di una volta ogni 2 settimane, poiché ciò aumenterà solo il rischio di irritazione della pelle.

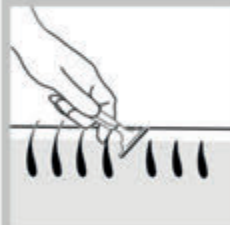

In quanto tempo si possono vedere i risultati con la depilazione IPL?

Tutto dipende dall'area che stai trattando, dalla crescita ormonale, dallo stile di vita e dai farmaci. I trattamenti per le gambe funzionano alla grande e vedrai una riduzione molto più rapida entro sei-nove trattamenti - Entro un anno o un anno e mezzo, vedrai una riduzione molto buona in altre aree. Le facce richiedono molto più tempo per essere trattate. La ragione di ciò è il fatto che il volto umano è molto ormonale: in un centimetro quadrato ci sono quasi cinquecento follicoli piliferi. Alcuni di loro sono inattivi. Un nuovo follicolo pilifero diventerà attivo e inizierai a vedere che la crescita dei capelli ricomincia.

Ripeti il trattamento ogni 4-6 settimane, questo manterrà la radice dei capelli inattiva e impedirà la ricrescita dei capelli. Quando continui a utilizzare l'IPL, vedrai risultati permanenti a partire dal terzo mese di trattamento. Questo NON significa che sarai libero dai capelli dopo tre mesi - Solo che inizierai a notare che molti peli del tuo corpo non ricrescono. Puoi raderti tra le sessioni IPL, evitando di spiumare e depilare subito dopo i trattamenti. La rasatura è il tuo nuovo metodo di depilazione preferito: qualsiasi altra cosa tirerà i peli dai loro follicoli e ostacolerà il processo IPL, cosa che non vuoi.

Se i peli ricrescono tra i trattamenti, accorcia semplicemente l'intervallo di trattamento, ma non trattare più spesso di una volta ogni 2 settimane, poiché ciò aumenterà solo il rischio di irritazione della pelle.



In che modo FAUSTINA IPL stimola la produzione di collagene?

FAUSTINA 3-IN-1 con lampada per ringiovanimento cutaneo IPL utilizza una gamma selettiva di lunghezze d'onda. La luce pulsata passa attraverso l'epidermide e penetra più in profondità nella pelle, dove l'energia luminosa provoca danni al pigmento. Questo fa sì che le difese naturali della pelle vengano in soccorso. Il corpo istintivamente lavora per rimuovere la melanina danneggiata e stimola i fibroblasti a produrre nuovo collagene e il rafforzamento delle fibre di elastina, aiutando la pelle a diventare più soda, più spessa e dall'aspetto più giovane.



Garanzia

In caso succeda qualcosa ...

Periodo di garanzia

. Unità principale: la garanzia dell'unità principale è di 1 anno dalla data di acquisto.

Lampada (e): i guasti alle lampade con oltre il 30% di colpi rimanenti causati da motivi non artificiali saranno mantenuti dal produttore.

Ambito della garanzia

Se il sistema è entro il periodo di garanzia, il produttore sostituirà il prodotto con uno nuovo dopo aver verificato per motivi non artificiali. Altri guasti che derivano da un uso anomalo e manovre forzate non sono coperti.

Limiti di garanzia

Quando richiedono la manutenzione gratuita per il prodotto entro il periodo di garanzia, i clienti devono mostrare una prova d'acquisto valida (come una fattura, un certificato di garanzia, qualsiasi tipo di ricevuta o estratto conto, ecc.)

La manutenzione gratuita non è prevista per i prodotti danneggiati a causa di un uso improprio o di manomissioni.

Non tratteremo nessuno dei seguenti:

Difetti e danni generali causati da incendi, terremoti, comportamento di terzi, colpa o uso improprio da parte degli utenti.
Utilizzo in altre condizioni anormali ed eventi imprevedibili.

Qualsiasi danno esteso causato dall'utilizzo dei prodotti (come discrepanze aziendali, perdita di vantaggi, interruzione dell'attività inclusa la perdita di risultati dall'uso improprio del sistema e il costo risultante dalla sostituzione di apparecchiature, dispositivi o servizi, o reclamo richiesto dagli utenti).

Danni causati da un utente improprio che esulano dal contenuto delle istruzioni elencate in questo manuale.

Ciò comprende:

Situazioni incontrollabili richiedevano l'assistenza di parti per risolvere problemi derivanti dall'uso di accessori, accessori o sostituti che non sono venduti dal produttore o dalla nostra azienda, e i servizi richiesti per risolvere problemi che derivano da smontaggio e rimontaggio inaccettabili o illegali lo strumento senza adeguate istruzioni.

Difetti o danni causati da un ambiente non adatto al prodotto.

Archiviazione non corretta da parte degli utenti (come danni causati da creature e infiltrazioni di liquidi).

Informazioni sul servizio

Grazie per aver acquistato con noi

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto! Al fine di fornire un servizio della massima qualità, fare riferimento alle informazioni di contatto di seguito se si riscontrano problemi o problemi con il dispositivo di bellezza IPL multifunzione FAUSTINA® appena acquistato.

Email: support@labotest.co.uk

website: www.labotest.co.uk

Certificato di garanzia

Compila i dettagli per presentare un reclamo

Nome e cognome:

Nome del prodotto:

Modello:

Data di acquisto:

Check Out Standard:

GB4706.1-2005

Allega la prova d'acquisto

Questo prodotto è conforme ai requisiti di qualità standard dopo il test ed è approvato per il rilascio

**Make the world a little more
beautiful with IPL technology.**

LABOTEST

HOME BEAUTY DEVICES & LAB EQUIPMENT

Suite 503,
Crown House Business Centre
North Circular Road,
London, NW10 7PN,
United Kingdom

www.labotest.co.uk